

厚生労働省
「地域医療連携の普及に向けた健康情報活用基盤実証事業」

のとメディカルネット

～私の健康note 操作説明書(医療従事者向け)～

本システムでは、他医療機関や薬局、患者さんが登録した情報の閲覧や登録ができます。

本システムで実施する内容		参照する章
I.	患者が来院、来局される前に準備すること。	
	① 実証端末を「実証端末起動終了手順」に沿って起動する。	➡ 「実証端末起動終了手順」(別紙)参照
	② 利用者ご自身のICカードとICカードのPINを用意する。	➡
	③ 本システムを起動し、ログインする。	➡ 1.ログイン
II.	患者から会員証を提示されたら実施すること。	
	① 患者のカードで患者の情報を表示する。	➡ 2.患者の情報表示
	② 患者の情報を参照しながら診察する。	➡ 3.患者の情報閲覧
	③ 患者の情報に診察結果を入力する。	➡ 4.患者の情報入力
III.	1日の業務終了後に行うこと。	
	① 本システムから、ログアウトする。	➡ 5.ログアウト
	② 実証端末を「実証端末起動終了手順」に沿って終了する。	➡ 「実証端末起動終了手順」(別紙)参照
IV.	システム利用時の注意事項について	
	① 緊急時・災害時の場合。	➡ 6.緊急時・災害時
	② 患者がカードを忘れた場合。	➡
	③ 補助作業による入力を行う場合。	➡ 「私の健康note操作説明書(補助作業)」(別紙)参照
	④ 複数人でシステムを利用する。	➡ 7.複数人でのシステム利用
V.	システムで発生するエラーについて	
	① システムへのログイン時にエラーが発生する。	➡ 8.ログインエラー

目次

タイトル	頁
1.ログイン	3
2.患者の情報表示	7
3.患者の情報閲覧	12
4.患者の情報入力	26
5.ログアウト	35
6.緊急時・災害時	36
7.複数人でのシステム利用	41
8.ログインエラー	42


1. ログイン

「のとメディカルネット」を起動し、システムへログインします。

(1) ご自身のICカードを、ICカードリーダーへ挿入します。


<補足>

① ICカードの表面を上にして、チップ側(図の金色部分)をカードリーダーに差し込みます。

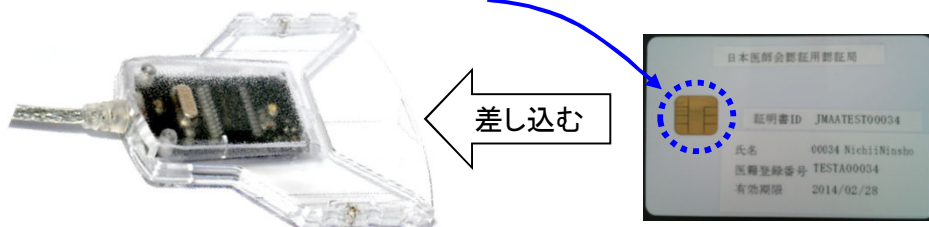


差し込んだときに、カードリーダーの緑のランプが点灯する事を確認してください。
ランプが点灯しない場合は、もう一度差し込みなおしてください。
(ランプはしばらくすると消えますが、そのまま差し込んだままとしてください。)


② 上記写真のICカードリーダーが接続されていないパソコンをご利用の方(一部医療機関のみ)は、フェリカードにご自身のICカードを置いてください。

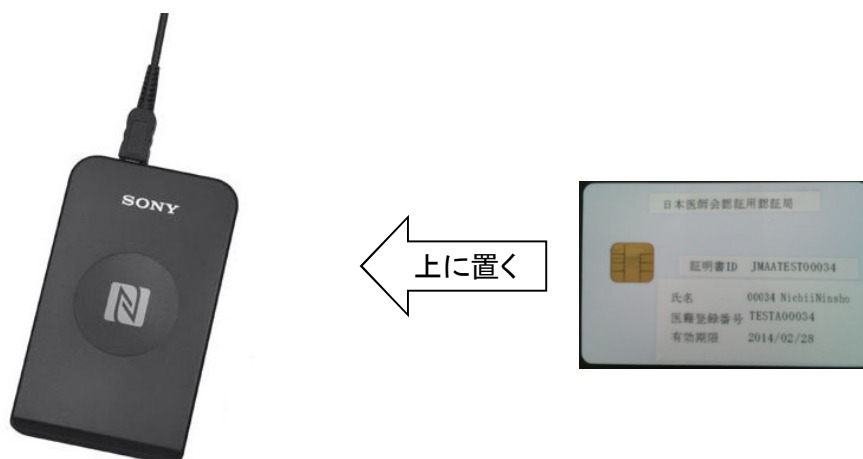

(2) デスクトップにある「のとメディカルネット」のアイコンをダブルクリックします。

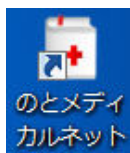

- (3) ログイン方法を選択する画面が表示されます。
「医療従事者の方」の次へボタンをクリックしてください。

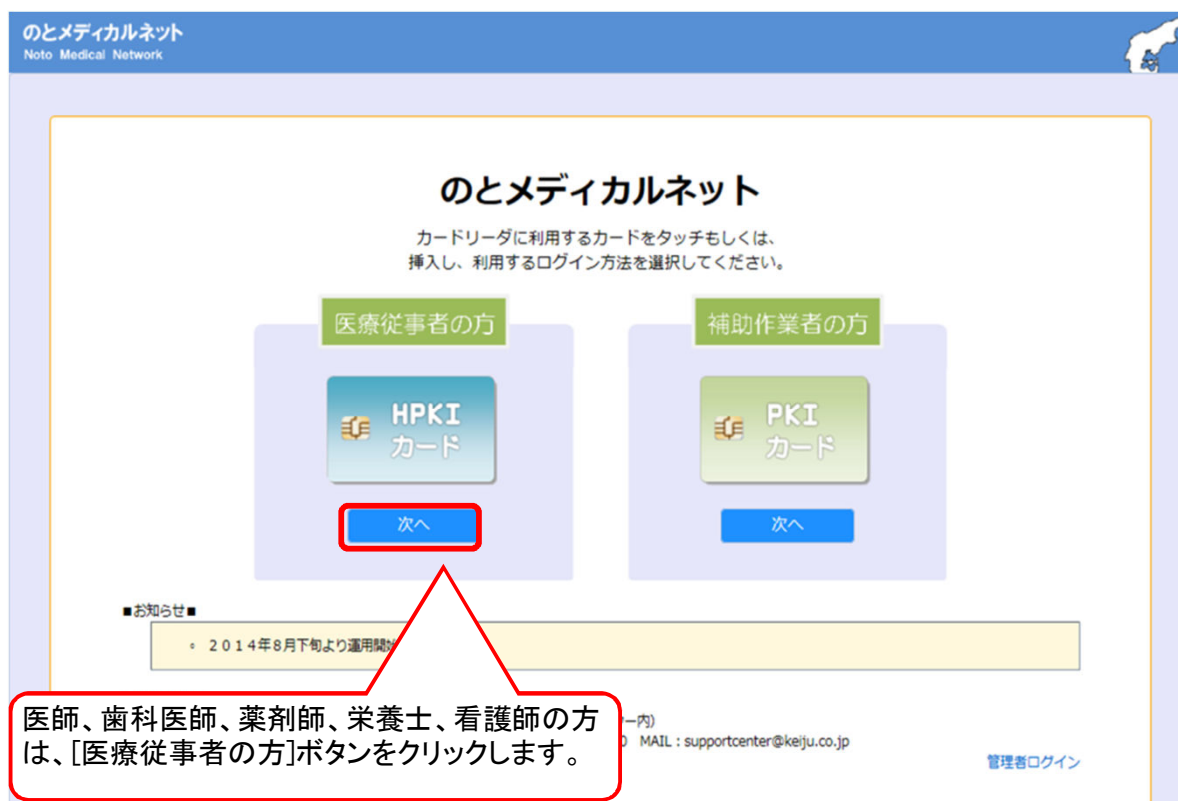


- (4) ログインするシステムを選択する画面が表示されます。
「私の健康note」の次へボタンをクリックしてください。




<参考>

ボタンのクリック時にエラーが発生する場合は、【8.ログインエラー】章をご確認ください。


- (5) カードの証明書選択画面が表示されます。
ご自身の証明書情報を選択後、[OK]ボタンをクリックします。

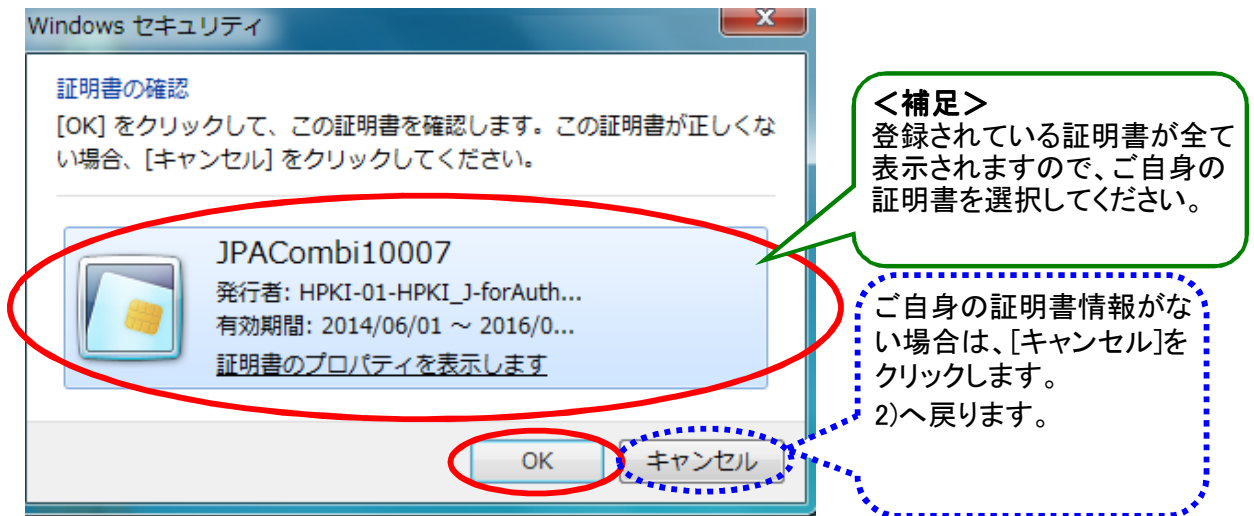

- <補足>
以下の警告画面が出た場合は、「はい」をクリックして先へ進んでください。

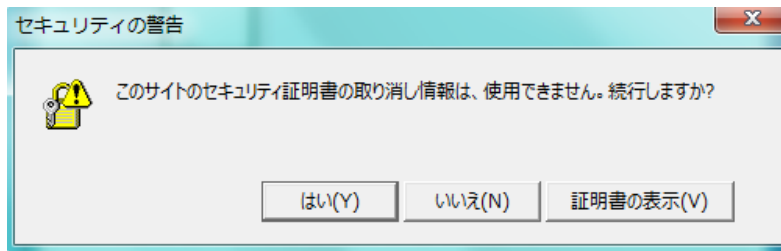

- (6) PIN入力画面が表示されます。
ご自身のPINを入力後、[OK]ボタンをクリックします。

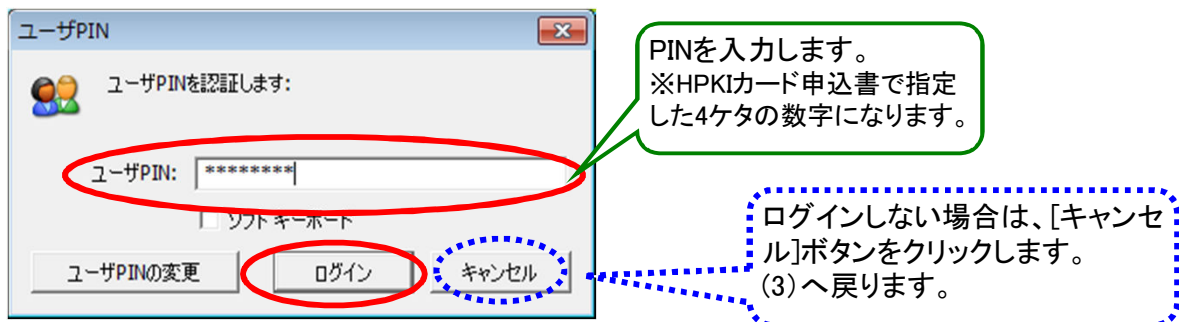

- <参考>
ボタンのクリック時にエラーが発生する場合は、【9.ログインエラー】章をご確認ください。


- (7) 「私の健康note」の患者選択(カード)画面が表示されます。
画面左上で、ご自身の氏名と医療機関が表示されることを確認してください。



<補足>

ご自身の医療機関が表示されない場合、もしくは、医療機関を変更したい場合は、設定が可能です。

- ① 画面左上のプロフィールボタンをクリックしてください。

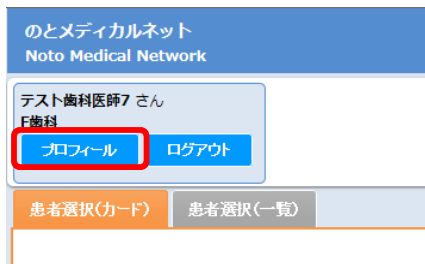

- ② プロフィール入力画面で、名称と選択ボタンを入力後、登録ボタンをクリックしてください。

名称に医療機関名を入力し、
表示したい名称の選択ボタンを
チェックしてください

以上で【1. ログイン】は終わりです。

2.患者の情報表示


患者さんの会員証を使って、患者さんの情報を表示します。

※私の健康noteは、患者さんの閲覧許可の下、情報を表示します。

会員カードの提示をもって、患者さんの閲覧許可を得たとみなし、閲覧権限を付与します。


(1) 患者さんが会員カードを持っていることを確認してください。

【患者さんが会員カードを持っている場合】
次へボタンをクリックしてください。

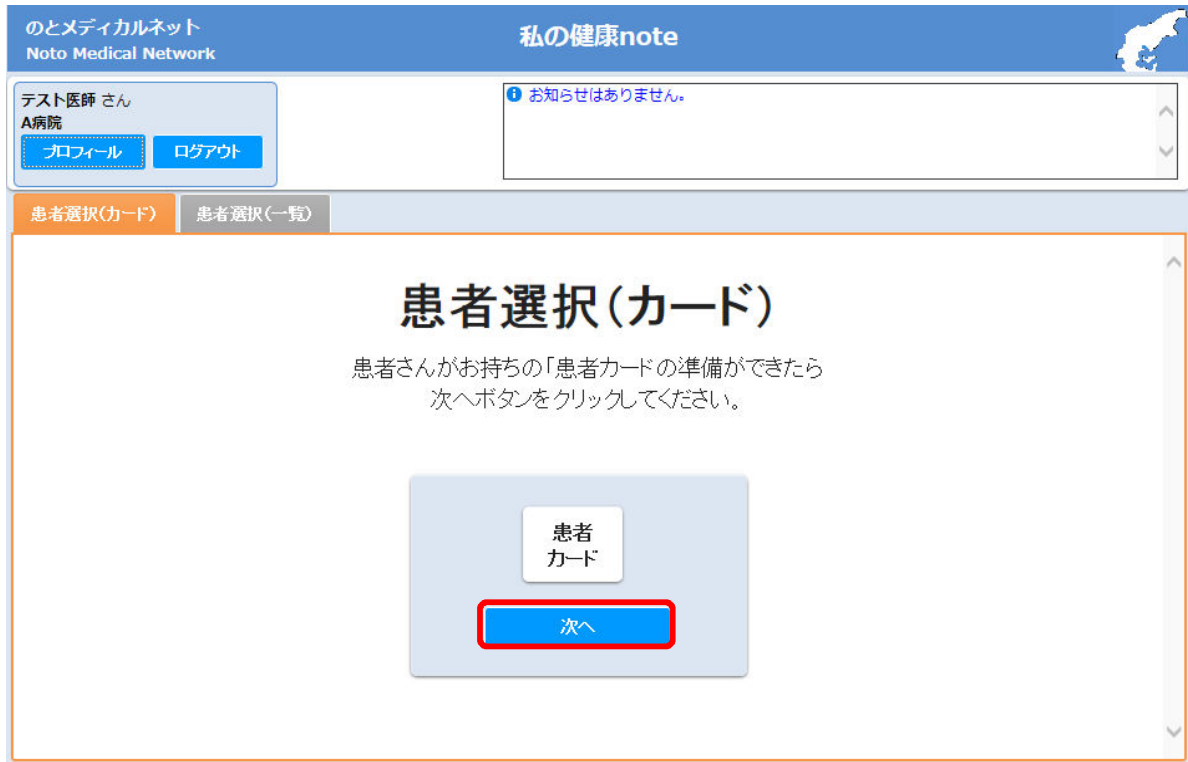

【患者さんが会員カードを忘れた場合】
6.緊急時・災害時 を参照ください。

(2) 患者さんの情報を閲覧する期間を選択してください。

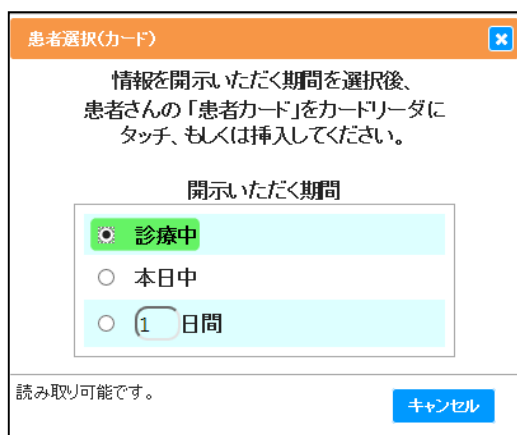

- ・診察中: 診察中のみ閲覧が可能です。
- ・本日中: 日付が変わるまで閲覧が可能です。
期間中は、患者さんの会員証がなくても、再ログイン、再表示が可能です。
- ・X日間: 指定した日数で閲覧が可能です。
期間中は、患者さんの会員証がなくても、再ログイン、再表示が可能です。

<補足>

患者さんが帰宅後に閲覧、情報入力を行う場合は、期間を「本日中」または「X日間」を選択してください。

(3) 患者さんの会員カードをフェリカーダへかざします。



【能登北部の会員カード】



【能登中部の会員カード】



<補足>

フェリカーダにHPKIカードが置いてある場合は、HPKIカードを外して、会員カードをかざしてください。(一部の医療機関のみ)

※HPKIカードをフェリカーダから外しても、ログイン状態は継続されます。

(4) 患者さんの情報が表示されます。

画面上部に、患者さんの氏名等が表示されることを確認してください。

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理疾病
糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
お知らせはありません。

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

本日 2014/08/13 時点の最新を表示 2014/05/01 ~ 2014/08/13 グラフ表示 印刷

絞り込み表示 → 糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

自分で測定した情報

測定した値	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	家庭血圧(収縮期)	*データなし*	---/---/---
<input type="checkbox"/>	家庭血圧(拡張期)	*データなし*	---/---/---
<input type="checkbox"/>	家庭体重	*データなし*	---/---/---
<input type="checkbox"/>	家庭BMI	*データなし*	---/---/---
<input type="checkbox"/>	家庭血糖	*データなし*	---/---/---

医科の情報 目標値入力 一括入力

体の基本情報

項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	身長	*データなし*
<input type="checkbox"/>	体重	*データなし*
<input type="checkbox"/>	BMI(計算)	*データなし*
<input type="checkbox"/>	腹囲	*データなし*
<input type="checkbox"/>	収縮期血圧	*データなし*
<input type="checkbox"/>	拡張期血圧	*データなし*

糖尿病の合併症

項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	糖尿病網膜症	*データなし*
<input type="checkbox"/>	糖尿病神経障害	*データなし*

指導の内容や治療方針 入力

飲み忘れても気が付いたら飲んでください。ただし、次に飲むタイミングまで2時間ない場合は、飲まないでください。

(5) 患者さんに会員カードをお返しします。

<補足>

(3)でフェリカーダからHPKIカードを外した場合は、患者さんに会員カードをお返しした後、もとのようにHPKIカードをフェリカーダへかざしてください。(一部の医療機関のみ)

(6) 患者さんが帰宅した後に患者さんの情報を表示したい場合



<前提条件>

- 患者さんの情報開示期間中である必要があります。
(1)(2)の操作で、患者さんのカードを使って開示期間の設定ができます。
必要な期間を、本日中、または、X日間で指定してください。

患者さんの会員証をフェリカリーダーにかざす前に、本日中 もしくは X日間にチェックを付与します。

①患者選択(一覧)タブを開きます。

【患者選択(カード)画面を開いている場合】
患者選択(一覧)タブをクリックしてください。

【患者さんのページを開いている場合】
画面上部の患者選択ボタンをクリックしてください。

②入力したい患者さんの行をクリックします。

一覧に名前が掲載されている患者さんは、
患者さんのカードがなくても、入力が可能です。

開示期間（入力、閲覧が可能な期間）
※期間を過ぎると、一覧から削除されます。

<補足>

患者選択（一覧）に名前がない患者さんのページを表示する場合は、
患者さんが来られたときに、(1)(2)の操作で開示期間を設定してください。

- ③患者さんの情報が表示されます。
画面上部に、患者さんの氏名等が表示されることを確認してください。

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理疾病
糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
お知らせはありません。

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

本日 2014/08/13 時点の最新を表示 2014/05/01 ~ 2014/08/13 グラフ表示 印刷

絞り込み表示→ 糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

自分で測定した情報

測定した値

項目	値	更新日
<input type="checkbox"/> 家庭血圧(収縮期)	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 家庭血圧(拡張期)	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 家庭体重	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 家庭腹囲	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 家庭血糖	*データなし*	----/--/--

医科の情報

体の基本情報

項目	値	更新日
<input type="checkbox"/> 身長	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 体重	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> BMI(計算)	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 腹囲	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 収縮期血圧	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 拡張期血圧	*データなし*	----/--/--

糖尿病の合併症

項目	値	更新日
<input type="checkbox"/> 糖尿病網膜症	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/> 糖尿病神経障害	*データなし*	----/--/--

指導の内容や治療方針
飲み忘れても気が付いたら飲んでください。ただし、次に飲むタイミングまで2時間ない場合は、飲まないでください。

※開示期間中は、何度でも表示が可能です。

以上で【2.患者の情報表示】は終わりです。

3.患者の情報閲覧

患者さんの情報を閲覧しながら、診察をします。
 <画面について>

【からだの情報タブ】

1) 私の健康note

2) 特に気を付けてほしいこと

3) 本日 2014/08/17 時点の最新を表示

4) 絞り込み表示 → 糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

5) 医科の情報

6) からだの基本情報

7) 印刷

8) 自分で測定した情報

9) 指導の内容や治療方針

10) 歯科の情報

11) 診療の情報

項目	値	更新日
家庭血圧(収縮期)	140.0 mmHg	2014/08/16
家庭血圧(拡張期)	80.0 mmHg	2014/08/16
家庭体重	64.4 kg	2014/08/16
家庭身長	81.1 cm	2014/08/16
家庭血糖	*データなし*	----

項目	値	更新日
身長	160.0 cm	2014/08/13
体重	65.0 kg	2014/08/17
BMI(計算)	25.39	2014/08/17
腹囲	80.0 cm	2014/08/13
収縮期血圧	137.0 mmHg	2014/08/13
拡張期血圧	87.0 mmHg	2014/08/13

項目	値	更新日
糖尿病網膜症	あり (眼科受診中)	2014/08/13
糖尿病神経障害	なし	2014/08/13

項目	値	更新日
腎不全家族歴	あり (実父)	2014/08/13
歯科定期受診	あり (月1回通院中)	2014/08/13
喫煙	過去にあり (1日20本×30年=219000本)	2014/08/13
冠動脈疾患の既往	あり (3年前)	2014/08/13

項目	値	更新日
糖尿病診断年齢	30歳代	2014/08/13
脂質異常症の診断年齢	40歳代	2014/08/13
CKD診断年齢	40歳代	2014/08/13

項目	値	更新日
総コレステロール	230 mg/dL	2014/08/13
HDLコレステロール	55 mg/dL	2014/08/13
中性脂肪	100 mg/dL	2014/08/13
non-HDLコレステロール(計算)	175 mg/dL	2014/08/13
血清総蛋白	30.0 g/dL	2014/08/13
血清アルブミン	30.0 g/dL	2014/08/13
Hb	15.0 g/dL	2014/08/13
ALT	55 IU/L	2014/08/13
AST	55 IU/L	2014/08/13
γGTP	55 IU/L	2014/08/13
尿酸窒素	22.0 mg/dL	2014/08/13
血清クレアチニン	1.5 mg/dL	2014/08/13
eGFR(計算)	31	2014/08/13
シスタチンC	1.8 mg/L	2014/08/13
血清カリウム	4.0 mEq/L	2014/08/13
尿酸	9.0 mg/dL	2014/08/13
尿蛋白	±	2014/08/13
尿アルブミン/クレアチニン	34.0 mg/g-Cr	2014/08/13
尿蛋白/クレアチニン比	6.00 g/g-Cr	2014/08/13
尿蛋白(一日量)	2.00 g/日	2014/08/13
糖尿	+	2014/08/13
血糖	222.0 mg/dL	2014/08/13
尿糖	±	2014/08/13
HbA1c(NGSP値)	7.0 %	2014/08/13

No	エリア名称	内容	閲覧	入力/変更
1)	管理疾病	患者さんが罹っている疾病を入力、表示します。	○	○
2)	 特に気をつけてほしいこと	患者さんへ特に伝えたいメッセージを入力 、表示します。	○	○
3)	表示日選択	表示する情報の年月日を指定します。 指定日時点での最新情報を表示します。	○	○
4)	疾病項目の絞り込み	医科の情報(5)エリア)の項目について、疾病に関する項目の表示絞り込みをします。 チェックを付与すると表示します。	○	○
5)	 医科の情報	患者さんの医科情報を入力、表示します。 手入力その他、検査結果の取り込みがある場合は、その内容を表示します。 目標値と実績値の入力ができます。	○	○
6)	グラフ表示	医科の情報(5)エリア)と自分で測定した情報(8)エリア)の項目について、指定した期間中、および、選択した項目をグラフ表示します。	○	-
7)	印刷ボタン	画面の情報を印刷できます。 必要に応じて、患者さんにお渡ししてください。	○	-
8)	 自分で測定した情報	患者さんが家庭で計測した値を表示します。 入力は患者さんのみ可能です。	○	-
9)	 指導の内容や治療方針	患者さんへの指導内容や治療方針を入力 、表示します。患者さんへの啓蒙と共に、医療機関間での情報共有に役立ててください。	○	○
10)	 歯科の情報	歯科医師が歯科Expressで登録した内容が表示されます。	○	-
11)	 診療の情報	1)～10)では表現しきれない 診療の情報を入力 、表示します。 例)エコー検査の所見等	○	○

(1) 疾病ごとに医科情報の表示項目を絞り込みたいとき

4) 疾病項目の絞り込み エリアのチェックで行います。
医科の情報(5)エリア)に表示する項目が対象になります。

例) 【すべてにチェックがある場合】

糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

検査結果	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	総コレステロール	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	HDLコレステロール	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	中性脂肪	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	non-HDLコレステロール(計算)	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血清総蛋白	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血清アルブミン	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	Hb	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	ALT	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	AST	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	γGTP	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿酸窒素	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血清クレアチニン	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	eGFR(計算)	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	シスタチンC	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血清カルウム	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿酸	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿蛋白	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿アルブミン/クレアチニン	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿蛋白/クレアチニン比	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿蛋白(一日量)	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血尿	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血糖	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿糖	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	HbA1c(NGSP法)	*データなし*	----

【糖尿病のみにチェックがある場合】

糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

検査結果	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	総コレステロール	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	HDLコレステロール	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	中性脂肪	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	non-HDLコレステロール(計算)	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	ALT	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	AST	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	γGTP	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血清クレアチニン	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	eGFR(計算)	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿蛋白	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿アルブミン/クレアチニン	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	血糖	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	尿糖	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	HbA1c(NGSP法)	*データなし*	----


糖尿病に関連する項目に絞り込まれます。

<補足>

からだの情報タブを表示した際のデフォルトの設定は、
1) 管理疾病で指定されている疾病にチェックが入ります。

(2) 画面を見るときに知っておきたいこと

① 値が赤色の背景になっている


【アラート通知機能】  Point

検査結果や入力値が、目標値の範囲外の場合に、背景が自動的に赤で表示されます。
患者さんとの目標値に対する認識合わせに活用ください。

体の基本情報	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	身長	160.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	体重	65.0 kg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	BMI(計算)	25.39	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	腹囲	80.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	収縮期血圧	137.0 mmHg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	拡張期血圧	87.0 mmHg	2014/08/13

目標値を超えている場合に
背景が赤色で表示されます。

② 更新日がオレンジ色の背景になっている

【リマインド通知機能】  Point

一定期間、値の入力もしくは反映がない場合は、更新日に色が付きます。
検査や情報登録が定期的実施されているか、患者さんと相談してください。

検査結果	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	総コレステロール	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	HDLコレステロール	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	中性脂肪	*データなし*	----
<input type="checkbox"/>	non-HDLコレステロール(計算)	*データなし*	----

③項目の詳細を見たいとき

項目にカーソルをあてると表示されます。

更新者名、基準値、アラートやリマインドの詳細メッセージがわかります。

項目	値	更新日
糖尿病網膜症	あり (眼科受診中)	2014/08/13
糖尿病神経障害	なし	2014/08/13

糖尿病の合併症

項目	値	更新日
糖尿病網膜症	あり (眼科受診中)	2014/08/13
糖尿病神経障害	なし	2014/08/13

病気の背景

詳細をみたい項目にカーソルを合わせます。

(3)過去の情報を表示したいとき

以下の2つの方法があります。

① 3)表示日選択 エリアで日付を指定

初期表示は、ログイン日です。

日付欄をクリックすると、カレンダーを表示しますので、カレンダーで日付を指定することもできます。本日日付に戻したいときは、本日ボタンをクリックします。

本日 2014/07/18 時点の最新を表示

指定した日時時点での最新情報を表示します。

項目	値	更新日
身長	* データなし *	----/--/--
体重	66.7 kg	2014/07/11
BMI(計算)	* データなし *	----/--/--
腹囲	82.0 cm	2014/06/13
収縮期血圧	138.0 mmHg	2014/07/11
拡張期血圧	85.0 mmHg	2014/07/11

体の基本情報

データが一度も登録されていない項目は「* データなし *」と表示されます。

② 詳細情報画面を表示

・2)特に気をつけてほしいこと、9)指導の内容や治療方針、11)診療の情報については、各エリア右上の入力ボタンをクリックします。

・5)医科の情報、8)自分で測定した情報、10)歯科の情報については、項目をクリックします。

登録済みデータの登録日時が、表示されます。日付をクリックすると内容が表示されます。

詳細情報

更新日時リスト

新規登録
2014/08/06 16:40 *

2014/08/13 00:00 -

冠動脈疾患の既往

冠動脈疾患の既往 あり なし 不明

コメント: 3年前

更新日時 2014/08/13 00:00

更新者 A病院

更新日時リストで選択されている登録済みデータの内容が表示されます。

【凡例】
*: 編集、削除可
-: 編集、削除不可

閉じる

(4) グラフを見たいとき

- 6) グラフ表示ボタンで行います。
 グラフに表示する期間、項目は選択できます。

手順②
 表示する期間を指定して、グラフ表示
 ボタンをクリックします。

<補足>

グラフ表示が可能な項目は、以下の通りです。

- グラフ欄にチェックボックスがあり、チェックが可能な項目
- 同時にグラフ表示することができるのは3つの項目までです。


以下のようにグラフ画面が表示されます。



<補足>

グラフ画面を開いた時には測定値のみを表示しています。
 基準値を表示したい場合や、グラフを非表示にする場合は、凡例の項目をクリックしてください。
 基準値の表示は、最大値・最小値の範囲を四角で囲みます。

※以下の例では、
 ALTの測定値が基準値範囲内に収まっています。

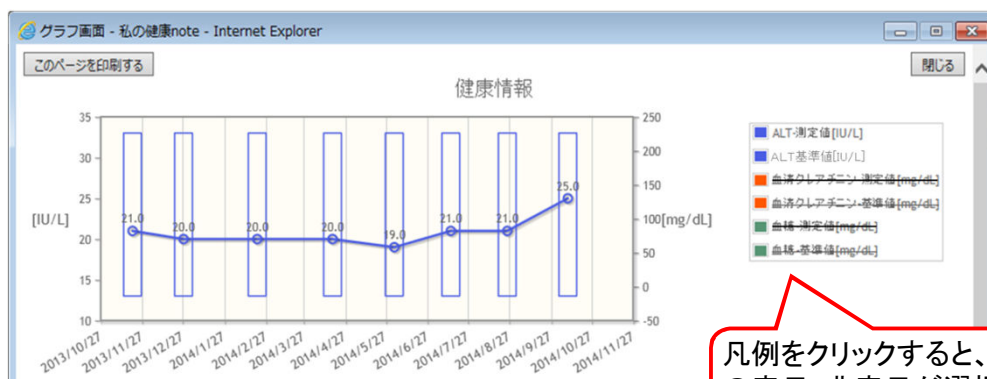

凡例をクリックすると、グラフの表示・非表示が選択できます

(5) 患者さん自身が家庭で測定した情報を見たいとき

- 8) 自分で測定した情報 エリアに表示されます。
 入力には患者さんのみ可能です。
 医療従事者の方は、閲覧のみ可能です。

自分で測定した情報

測定した値			
項目	値	更新日	
<input type="checkbox"/> 家庭血圧(収縮期:上)	150.0 mmHg	2015/01/15	
<input type="checkbox"/> 家庭血圧(拡張期:下)	80.0 mmHg	2015/01/15	
<input type="checkbox"/> 家庭体重	68.0 kg	2015/01/15	
<input type="checkbox"/> 家庭腹囲	80.0 cm	2015/01/15	
<input type="checkbox"/> 家庭血糖	140.0 mg/dL	2015/01/15	

患者さんが入力していなければ、データなし、と表示されます。

(6) 歯科の情報を見たいとき

- 10) 歯科の情報 エリアに表示されます。
 歯科医師が歯科Expressで登録した内容が表示されます。
 歯科医師以外の医療従事者の方は、閲覧のみ可能です。

歯科の情報

歯の様子			
項目	値	更新日	
<input type="checkbox"/> 歯科定期受診	あり (月1回7月より通院中)	2014/08/05	
<input type="checkbox"/> 歯周病	軽度 (特に上側)	2014/08/05	
<input type="checkbox"/> 咀嚼・嚥下機能	悪 (苦しそう)	2014/08/05	
<input type="checkbox"/> 歯科治療・口腔ケアの必要性	あり (歯磨き指導を実施)	2014/08/05	

(7) 画面を印刷して、患者さんに渡したい時

① 指導内容や医科情報等を印刷する

7) 印刷ボタンで行います。
からだの情報タブの印刷ボタンをクリックします。



出力対象エリアで印刷する情報の絞りこみができます。
必要な情報を選択して、このページを印刷するボタンをクリックしてください。
なお、ご利用のパソコンがプリンタに有線接続されている必要があります。

内容を確認して、このページを印刷するボタンをクリックしてください。

https://mydoctor.keiju.co.jp/ - 印刷画面 - 私の健康note - Internet Explorer

このページを印刷する

出力対象
 特に気を付けてほしいこと 指導の内容や治療方針 診療の情報 医科の情報 歯科の情報
 自分で測定した情報
最新項目すべて 文書は履歴もすべて出力する **表示更新**

能登冬子様昭和44年7月4日生 45歳女性 最新更新日 2014/08/13

特に気を付けてほしいこと 最新更新日 2014/08/13

情報	更新日	更新者
腹八分目を心がけてください。お酒は1日ビール1缶まではOKです。	2014/08/13	A病院 歯科医師:テオ-医師

指導の内容や治療方針 最新更新日 2014/08/13

情報	更新日	更新者
服薬の習慣をつけて、全体的に数値を下げていきましょう。 食事は栄養指導を元に3食しっかり食べてください。その代り、間食は我慢しましょう。	2014/08/13	A病院 歯科医師:テオ-医師
飲み忘れても気が付いたら飲んでください。ただし、次に飲むタイミングまで2時間ない場合は、飲まないでください。	2014/08/06	エヌスタッフ薬局 手帳 GW

診療の情報 最新更新日 2014/08/13

情報	更新日	更新者
A病院にて栄養指導を実施。	2014/08/13	A病院 歯科医師:テオ-医師


医科の情報 最新更新日 2014/08/13

項目	値	更新日	更新者
糖尿病診断年齢	30歳代	2014/08/13	A病院
脂質異常症の診断年齢	40歳代	2014/08/13	A病院
CKD診断年齢	40歳代	2014/08/13	A病院
腎不全家族歴	あり (実父)	2014/08/13	A病院
歯科定期受診	あり (月1回通院中)	2014/08/13	A病院
喫煙	過去にあり (1日20本×30年 =219000本)	2014/08/13	A病院
冠動脈疾患の既往	あり (3年前)	2014/08/13	A病院

出力対象を選択して、表示更新ボタンをクリックすると、必要な情報に絞り込むことができます。

②グラフを印刷する


- 6) グラフ表示ボタンでグラフを表示して、印刷します。
グラフを表示した状態で、このページを印刷する ボタンをクリックしてください。
なお、ご利用のパソコンがプリンタに有線接続されている必要があります。

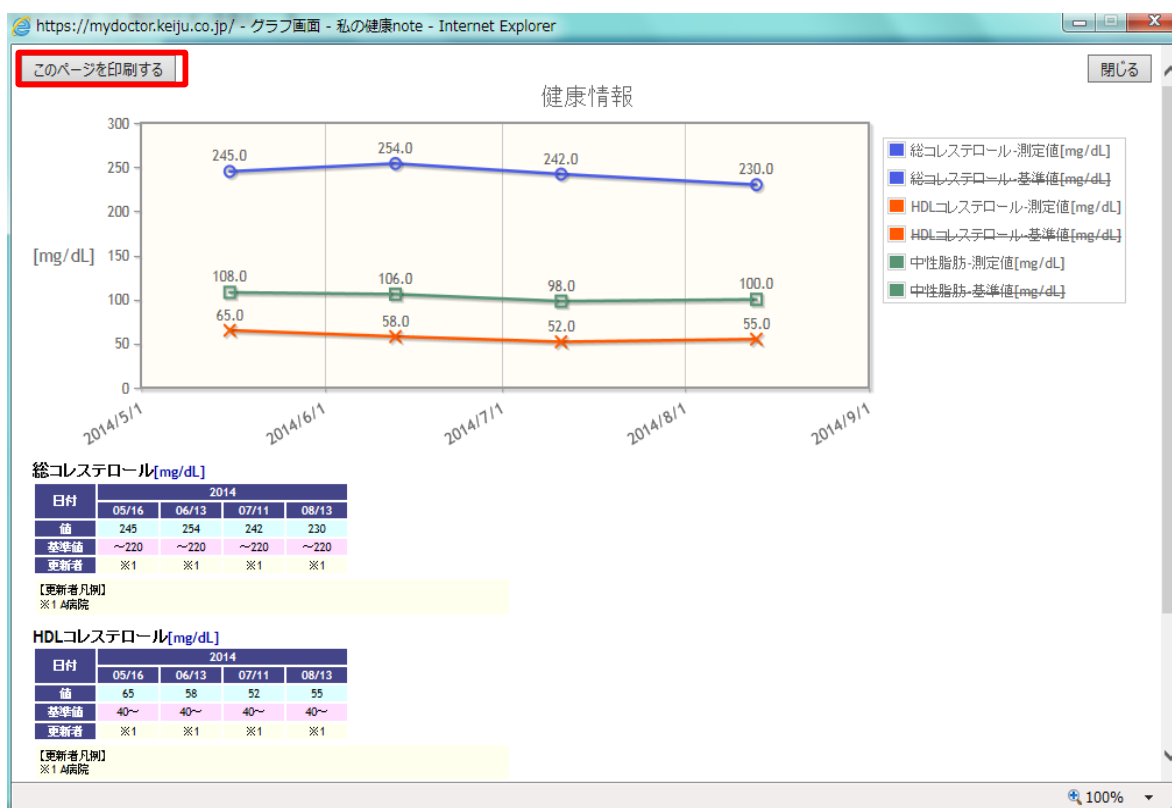

※グラフの表示方法は、(4) グラフを見たいときを参照ください。

【お知らせタブ】

システムメンテナンスなど、システム管理者からのお知らせを表示します。

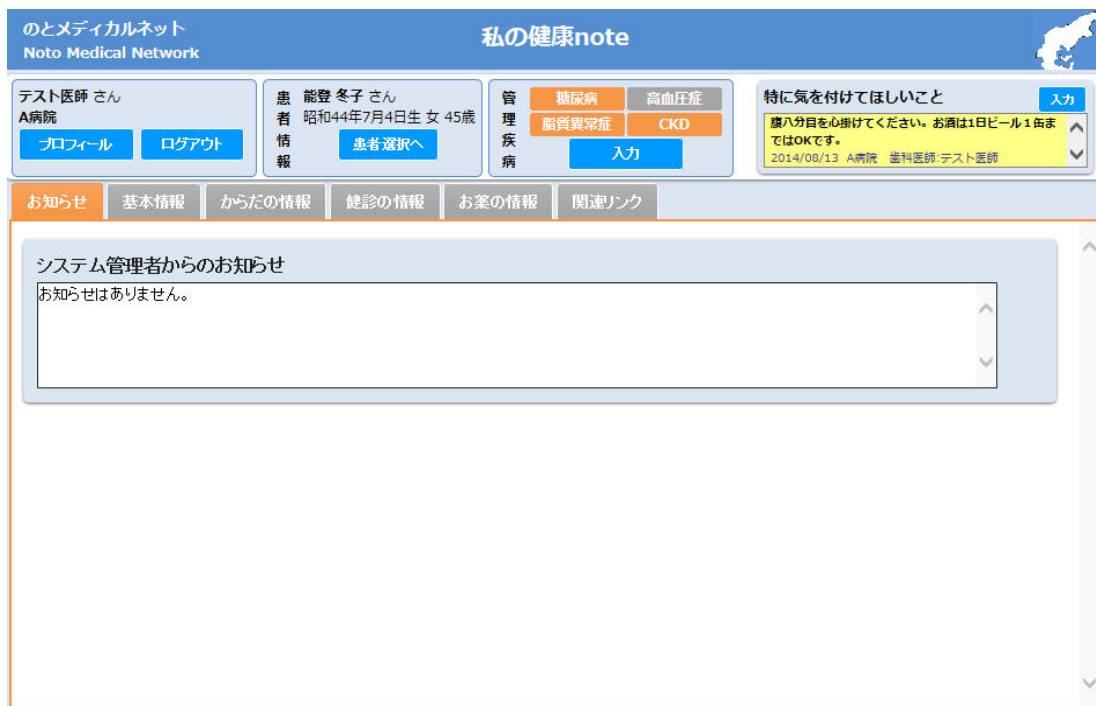

のとメディカルネット
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理疾病
糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
入力
腰八分目を心掛けてください。お酒は1日ビール1缶まではOKです。
2014/08/13 A病院 歯科医師:テスト医師

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

システム管理者からのお知らせ
お知らせはありません。

【基本情報タブ】

患者さんの基本情報を表示します。

医療従事者の方は変更できません。(患者さんのみ登録、変更が可能です)



のとメディカルネット
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理疾病
糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
入力
腰八分目を心掛けてください。お酒は1日ビール1缶まではOKです。
2014/08/13 A病院 歯科医師:テスト医師

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

基本情報

氏名	能登 冬子(ト フユコ)
性別	女性
生年月日	昭和44年7月4日生 45歳
郵便番号	000-0000
住所	石川市区町村番地
電話番号	
緊急連絡先	
勤務先	
病院	
かかりつけ医	
かかりつけ歯科医	

【健診の情報タブ】

患者さんの健康診断の結果を表示します。
 健康診断の結果は、患者さん自身が登録した場合に表示されます。
 医療従事者の方は変更できません。(患者さんのみ登録、変更が可能です)

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network
私の健康note

テスト医師 さん
A病院

[プロフィール](#) [ログアウト](#)

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳

患者情報 [患者選択へ](#)

管理 糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD

疾病 [入力](#)

特に気を付けてほしいこと [入力](#)

糖八分目を心掛けてください。お酒は1日ビール1缶まではOKです。

2014/08/13 A病院 内科医師、テスト医師

お知らせ!
基本情報
からだの情報
健診の情報
お薬の情報
関連リンク

表示日付 本日 2014/08/29 ~ 過去 3 回 [表示更新](#)

健診結果

	2012/08/12	2013/07/11	2014/08/19
身長	169.2 cm	169.2 cm	169.2 cm
体重	79.5 kg	62.5 kg	65.5 kg
肥満度	*データなし*	19.0 %	*データなし*
腹囲	*データなし*	74.5 cm	70.0 cm
BMI	*データなし*	22.0	*データなし*
裸眼視力(右)	*データなし*	1.2	*データなし*
裸眼視力(左)	*データなし*	1.2	*データなし*
血圧最高	*データなし*	124.0 mmHg	150.0 mmHg
血圧最低	*データなし*	85.0 mmHg	100.0 mmHg
白血球数	*データなし*	*データなし*	*データなし*
赤血球数	*データなし*	*データなし*	*データなし*
ヘモグロビン	*データなし*	*データなし*	*データなし*
ヘマトクリット値	*データなし*	*データなし*	*データなし*
血小板数	*データなし*	*データなし*	*データなし*
総コレステロール	*データなし*	*データなし*	*データなし*
HDLコレステロール	*データなし*	*データなし*	*データなし*
LDLコレステロール	*データなし*	*データなし*	*データなし*
中性脂肪	*データなし*	*データなし*	*データなし*
AST	*データなし*	*データなし*	*データなし*
ALT	*データなし*	*データなし*	*データなし*
γGTP	*データなし*	*データなし*	*データなし*
クレアチニン	*データなし*	*データなし*	*データなし*
尿酸	*データなし*	*データなし*	*データなし*
血糖値	*データなし*	*データなし*	*データなし*

患者さんが入力していない場合、「健診結果が見つかりませんでした。」と表示されます。

【お薬の情報タブ】

患者さんのお薬手帳等を表示します。

※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。

(1) お薬を飲んでいる期間を確認するとき

お薬の情報タブをクリックすると、以下のカレンダー画面が表示されます。

お薬の情報

2014年10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

メモ(体調の変化やその他気が付いたこと等) 最新更新日 2014/12/11

8/8 お薬を飲んだあと、少し眠くなった。
9/10 気持ち悪い日がつづく。

前月を表示します。

次月を表示します。

お薬手帳画面を開きます。

調剤日から処方日数期間中は
お薬アイコンが表示されます。
アイコンをクリックすると該当日
のお薬一覧画面へ移動します。

患者さんが記録したメモが表示されます。

<補足>


お薬の情報タブの画面上部「カレンダー」ボタンを押すと、カレンダー画面に戻ります。

お薬の情報

カレンダー

(2) お薬手帳を見たいとき

お薬の情報タブの画面上部の「お薬手帳」ボタンをクリックすると、お薬手帳画面が表示されます。

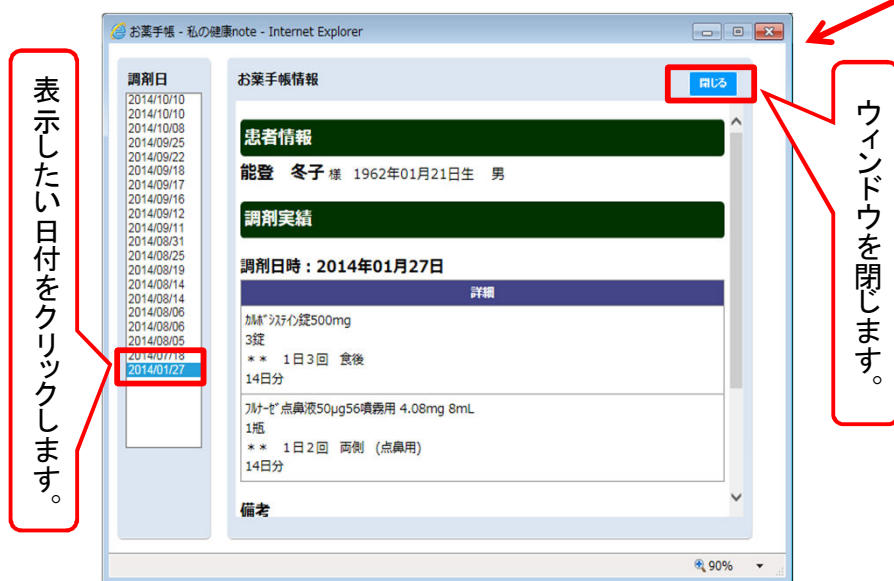

(3) 患者さんが登録した服薬の記録をみたいとき

カレンダー画面に表示されているお薬アイコンをクリックすると、指定日のお薬一覧画面が表示されます。

のとメディカルネット
Noto Medical Network

私の健康note

テスト薬剤師7 さん
G薬局
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭44年7月4日生 女 45歳
患者情報 患者選択へ

管理 糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD
疾病 入力

特に気を付けてほしいこと 入力
運動をしてください
2014/11/06 C病院 医師:テスト医師13

お知らせ! 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

お薬の情報 カレンダー お薬手帳

お薬手帳を表示したい場合、お薬手帳の「表示」ボタンをクリックします。

2014年09月18日のお薬一覧 ※ご自身の処方薬で、同じお薬が重複して表示される場合があります。

No	服用登録	お薬手帳	調剤日	調剤施設
1	表示中	表示	2014/08/25	薬局
2	表示	表示	2014/09/18	F歯科医院(北部)

服用登録
日付の列のマークをクリックして服用状況を登録します。
■(未選択) ⇒ ◎(服用した) ⇒ ×(服用していない)の順番に変わります。

No	お薬名	服用日	8月							9月							
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
1	リビトール錠5mg 用法 内服 1日1回 夕食後(14日分)	夕食後	■	◎	◎	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

No	お薬名	服用日	8月							9月													
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ロブ錠60mg 用法 内服・頓服・歯痛時	朝食後 昼食後 夕食後	◎	■	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◎	■	■

同日に複数の調剤実績がある場合、服用登録の「表示」ボタンを押して表示を切替えます。

Point

- 患者さんが登録した服薬の記録は、以下のように表示されます。医療従事者の方は変更できません。(患者さんのみ登録、変更が可能です)

No	お薬名	服用日	8月							9月						
			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1	リビトール錠5mg 用法 内服 1日1回 夕食後(14日分)	夕食後	■	◎	◎	◎	×	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : 未登録 ◎ : 服用した × : 服用していない(飲み忘れ等)

- 外用薬や頓用の場合、また用法コードが指定されていない場合は、以下のように表示され、服薬の記録はできません。

No	お薬名	服用日
1	ロキソニン錠60mg 用法 内服・頓服・歯痛時	※※このお薬は服用登録できません※※

【関連リンクのタブ】

患者さん向けに、疾病の参考になるようなホームページのリンクを掲載しています。

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理 入力
疾病 入力

特に気を付けてほしいこと 入力
腰八分目を心掛けてください。お酒は1日ビール1缶まではOKです。
2014/08/13 A病院 産科医師・テスト医師

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

関連リンク

- [Web]厚生労働省 糖尿病ホームページ
- [Web]厚生労働省 高血圧ホームページ
- [Web]厚生労働省 脂質異常症ホームページ

以上で【3.患者の情報閲覧】は終わりです。

4.患者の情報入力


患者さんへのコメントや診察結果を入力します。

<前提条件>

入力には、所属医療機関の設定が必要です。

画面左上のプロフィールボタンをクリックしてください。

プロフィール入力画面で、名称と選択ボタンを入力後、登録ボタンをクリックしてください。

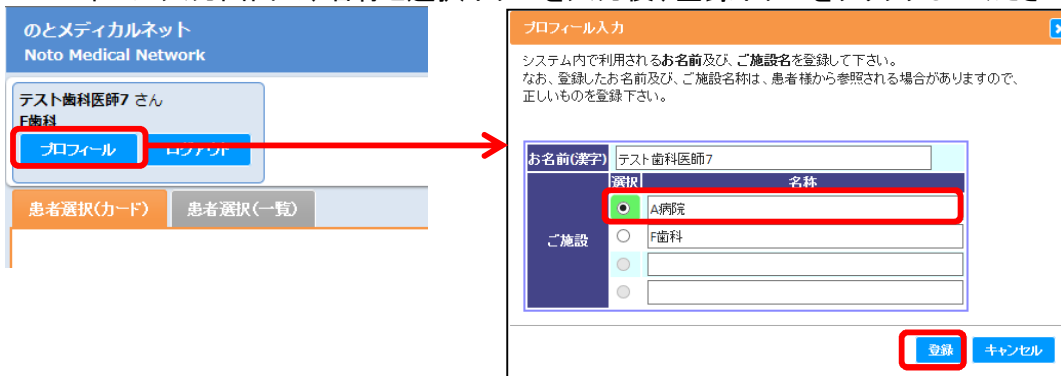

(1) 患者さんの管理疾病を登録したいとき

患者さんの情報を初めて表示した際には、患者さんが罹っている(もしくは管理したい)疾病を登録してください。私の健康noteで対象としている疾病は以下の4つです。

- ・ 糖尿病
- ・ 高血圧症
- ・ 脂質異常症
- ・ CKD



登録は、1)管理疾病エリアで行います。

管理疾病エリアの入力ボタンをクリックします。

疾病にチェックを入れ、登録ボタンをクリックしてください。




<画面位置>

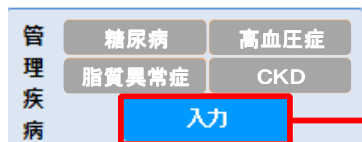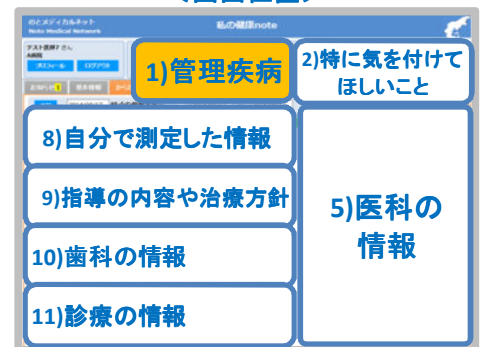

チェックをした疾病はオレンジで表示されます。

絞り込み表示のチェックが外れます。※からだの情報タブを表示した際のデフォルト設定に反映されます。

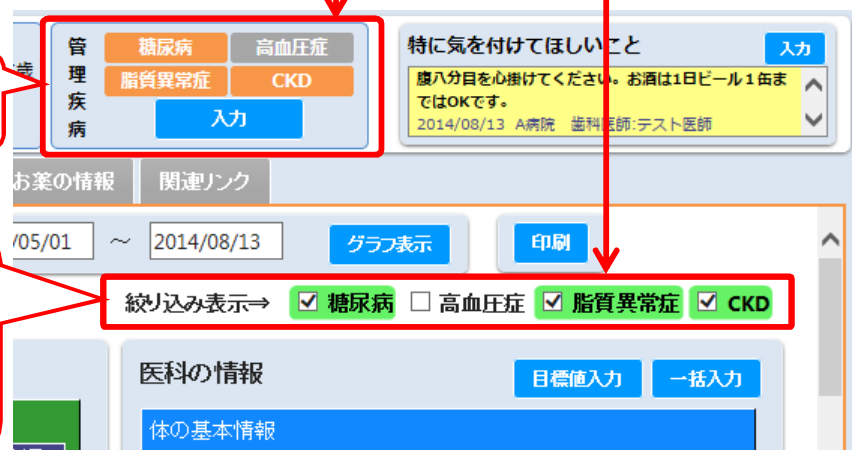



(2) 患者さんの検査結果や測定値等を入力したい時
医科の情報エリアで入力します。



- ① 目標値の入力 ※手入力のみ可能です
項目ごとに目標値を入力すると、【アラート通知機能】に
反映されます。患者さんへの療養指導等にご利用ください。

目標値入力ボタンをクリックし目標値入力画面を開きます。
目標値入力画面で、該当項目の目標値を入力後、
登録ボタンをクリックしてください。

<画面位置>

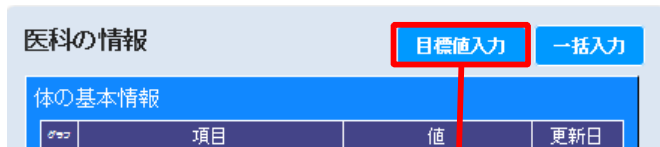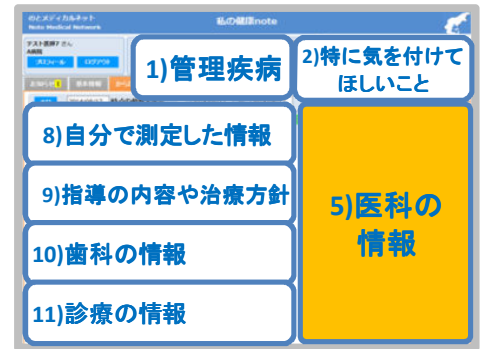

管理対象外項目や目標値がない
場合は、空欄で構いません。

目標値入力

項目	目標値			項目	目標値				
身長		~	160.0	cm	Hb	10	~	4.0	g/dL
体重		~	60.0	kg	ALT		~	8	IU/L
BMI	18	~	25		AST		~	7	IU/L
腹囲		~	75.0	cm	γGTP		~	6.0	IU/L
収縮期血圧		~	130.0	mmHg	尿素窒素		~	5.0	mg/dL
拡張期血圧		~	70.0	mmHg	血清クレアチニン		~	4.4	mg/dL
総コレステロール		~	170	mg/dL	eGFR		~	3	
HDLコレステロール	40	~	60	mg/dL	シスタチンC		~	2.0	mg/L
中性脂肪		~	20	mg/dL	血清カリウム		~	1.0	mEq/L
non-HDLコレステロール		~	120	mg/dL	尿酸		~	9.0	mg/dL
血清総蛋白		~	1.5	g/dL	尿アルブミン/クレアチニン		~	5.0	mg/g·Cr
血清アルブミン		~	2.0	g/dL	尿蛋白/クレアチニン比		~	4.00	g/g·Cr

登録 キャンセル

<補足>

目標値自体が制限値範囲(パニック値)を超えると、エラーが表示されます。
値を見直して、再度登録してください。

<補足>

目標値の入力は任意です。また、目標値が変わった場合は、変更が可能です。
入力がない場合は、以下の【アラート通知機能】は表示されません。

【アラート通知機能】

検査結果や入力値が、目標値の範囲外の場合に、背景が自動的に赤で表示されます。

体の基本情報

チェックボックス	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	身長	160.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	体重	65.0 kg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	BMI(計算)	25.39	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	腹囲	80.0 cm	2014/08/13

目標値の範囲を超えている場合
に背景が赤になります。

②値の入力 ※手入力と自動登録が可能です



【自動登録の場合】

医療機関と検査結果等のデータ連携をしている場合、自動的に登録されます。

【手入力の場合】

医療機関から検査結果等が出力されない場合や、自動登録対象外の項目は画面で手入力ができます。

一括入力ボタンをクリックし、医科情報一括入力欄で、該当項目の値を入力してください。

<画面位置>



医科情報一括入力

更新日: 2014/08/13 本日 更新者: A病院

更新	項目	値	基準値	更新日
<input checked="" type="checkbox"/>	身長	160 cm		----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	体重	65 kg		----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	腹囲	80 cm		----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	収縮期血圧	137 mmHg	mmHg ~ 140 mmHg	----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	拡張期血圧	87 mmHg	mmHg ~ 90 mmHg	----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	糖尿病網膜症	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント:眼科受診		----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	糖尿病神経障害	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント:		----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	腎不全家族歴	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント:実父		----/--/--
<input checked="" type="checkbox"/>	歯科定期受診	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント:月1回通院		----/--/--

登録 キャンセル

入力した項目には、自動的にチェックが付きます。「登録」ボタンをクリックしたときに、チェックが付いている項目のみ登録されます。

入力値が反映されます。

体の基本情報

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	身長	160.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	体重	65.0 kg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	BMI(計算)	25.39	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	腹囲	80.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	収縮期血圧	137.0 mmHg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	拡張期血圧	87.0 mmHg	2014/08/13



<補足>

更新日を変更することで、過去データの登録も可能です。
患者さんがカードを忘れた等で、前回診察分の検査結果を手入力する場合などにご利用ください。

日付欄をクリックすると、カレンダーが表示されますので、更新日を変更してください。
その後、値を入力してください。

医科情報一括入力

更新日: 2014/08/13 × 本日 更新者: A病院

更新	2014年 8月							基準値	更新日
	日	月	火	水	木	金	土		
<input type="checkbox"/> 身長									2014/08/13
<input type="checkbox"/> 体重						1	2		2014/08/13
<input type="checkbox"/> 腹囲	3	4	5	6	7	8	9		2014/08/13
<input type="checkbox"/> 収縮期血圧	10	11	12	13	14	15	16		mmHg ~ 140.0 mmHg 2014/08/13
<input type="checkbox"/> 拡張期血圧	17	18	19	20	21	22	23		mmHg ~ 90.0 mmHg 2014/08/13
<input type="checkbox"/> 血糖	24	25	26	27	28	29	30	不明	2014/08/13
	31								
<input type="checkbox"/> 糖尿病神経障害	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント:								2014/08/13
<input type="checkbox"/> 腎不全家族歴	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント: 実父								2014/08/13
<input type="checkbox"/> 歯科定期受診	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 不明 コメント: 月1回通院								2014/08/13

登録 キャンセル

<補足>

自動登録対象の項目は、医科の情報の「検査結果」のみとなります。
青枠の「からだの基本情報」「糖尿病の合併症」「病気の背景」「病気になった時期」については、自動登録対象外です。

医科の情報

からだの基本情報

グラフ	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	身長	160.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	体重	64.5 kg	2014/09/03
<input type="checkbox"/>	BMI(計算)	25.20	2014/09/03
<input type="checkbox"/>	腹囲	80.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	収縮期血圧	130.0 mmHg	2014/09/03
<input type="checkbox"/>	拡張期血圧	90.0 mmHg	2014/08/19

糖尿病の合併症

グラフ	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	糖尿病網膜症	あり (眼科受診中)	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	糖尿病神経障害	なし	2014/08/13

病気の背景

グラフ	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	腎不全家族歴	あり (実父)	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	歯科定期受診	あり (月1回通院中)	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	喫煙	過去にあり (1日20本×30年=219000本)	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	冠動脈疾患の既往	あり (3年前)	2014/08/13

左下からの続き

病気になった時期

グラフ	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	糖尿病診断年齢	30歳代	2014/08/13

検査結果

グラフ	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	ALT	55 IU/L	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	AST	55 IU/L	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	γGTP	55 IU/L	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	血清クレアチニン	1.5 mg/dL	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	eGFR(計算)	31	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	尿蛋白	±	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	尿アルブミン/クレアチニン	34.0 mg-g-Cr	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	血糖	222.0 mg/dL	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	尿糖	±	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	HbA1c(NGSP値)	7.0 %	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	総コレステロール	230 mg/dL	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	HDLコレステロール	55 mg/dL	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	中性脂肪	100 mg/dL	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	non-HDLコレステロール(計算)	175 mg/dL	2014/08/13

※自動登録対象
手入力も可

右上に続く



<補足>

一括入力ボタンではなく、項目を一つずつ登録することもできます。

表示されている項目をクリックすると入力画面が表示されますので、内容を入力後、新規登録ボタンをクリックしてください。

The image shows a two-step process. The first step is a table titled '病気の背景' (Background of illness) with columns for '項目' (Item), '値' (Value), and '更新日' (Update date). The second step is a '詳細情報' (Detailed information) form for '冠動脈疾患の既往' (Coronary artery disease history), which includes a '新規登録' (New registration) list, a form with radio buttons for 'あり' (Yes), 'なし' (No), and '不明' (Unknown), a comment field, update date, and user selection, and a '新規登録' (New registration) button.

項目	値	更新日
腎不全家族歴	あり (実父)	2014/08/13
歯科定期受診	あり (月1回通院中)	2014/08/13
喫煙	過去にあり (1日20本×30年=219 000本)	2014/08/13
冠動脈疾患の既往	あり (3年前)	2014/08/13

詳細情報

更新日時リスト

新規登録

- 2014/09/06 16:40 *
- 2014/08/13 00:00 -

冠動脈疾患の既往

冠動脈疾患の既往

あり なし 不明

コメント:

更新日時: 2014/09/06 16:45

更新者: G薬局

新規登録

【凡例】

- *: 編集、削除可
- : 編集、削除不可


閉じる

- (3) 患者さんへの指導方針や伝えたいことを入力したい時
 ① 指導内容や治療方針を入力する




9) 指導の内容や治療方針エリアで入力します。
 指導の内容や治療方針 エリア内右上の入力ボタンをクリックします。
 内容を入力後、新規登録ボタンをクリックしてください。

<画面位置>

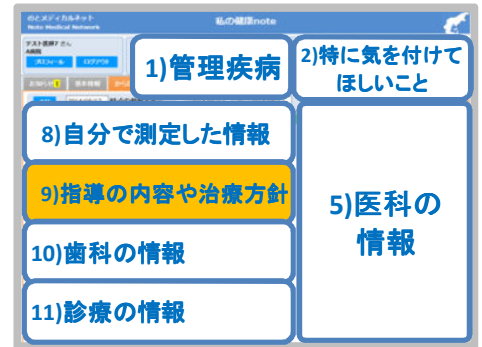

入力内容が表示されます。

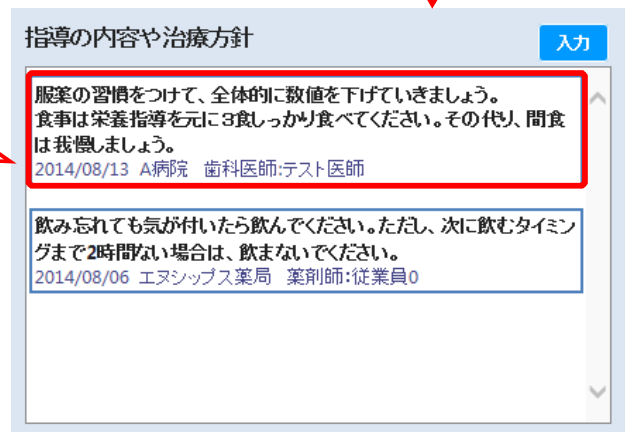


②医科情報等では表現しきれない診療の情報を入力する

11)診療の情報エリアで入力します。
エコー検査の所見や介護状況など、医科情報等では表現しきれない患者さんの診療の情報を入力してください。

診療の情報 エリア内右上の入力ボタンをクリックします。
内容を入力後、新規登録ボタンをクリックしてください。

<画面位置>

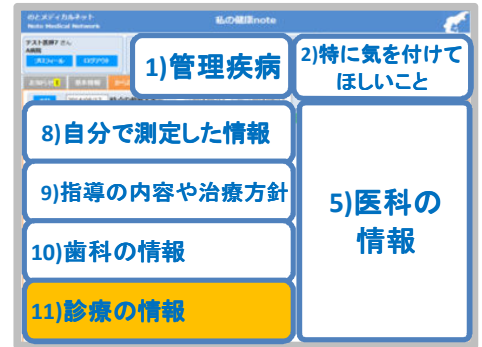

診療の情報

詳細情報

更新日時リスト	診療の情報
新規登録 2014/08/06 00:00 -	指導の内容や治療方針
	更新日時 2014/08/13 14:30
	更新者 A病院

【凡例】
*:編集、削除可
-:編集、削除不可

入力内容が表示されます。

診療の情報

頸動脈エコー検査
Rt IMT 表面性状 内部性状ECST
CCA(S3)0.9mm
2014/08/13 A病院 歯科医師:テスト医師



③患者さんに、特に気を付けてほしいことを入力する

2)特に気をつけてほしいことエリアで入力します。
患者さんが一番目につく場所です。
患者さんがログインするたびに目に留まるよう、
最も気を付けて欲しい事項の連絡に活用してください。




特に気を付けてほしいことエリア 右上の
入力ボタンをクリックします。
内容を入力後、新規登録ボタンをクリックしてください。

<画面位置>

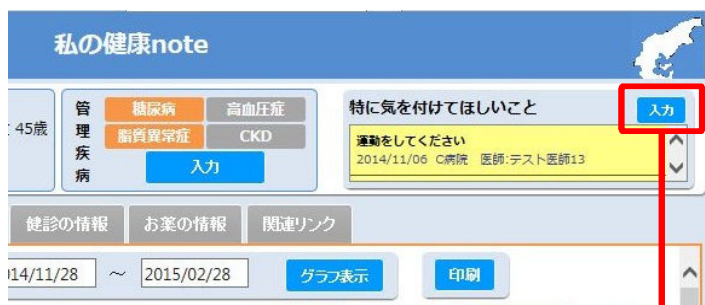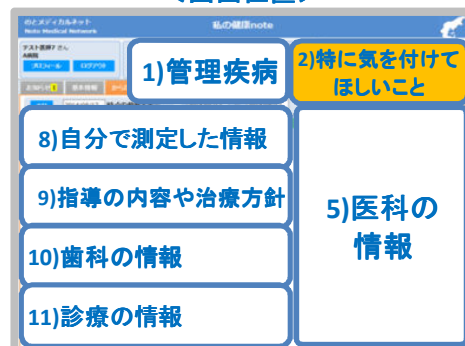

入力内容が表示されます。

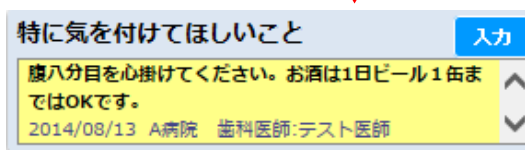


(4) 入力した内容を更新・削除したい

- 以下の全エリアで共通です。
- 2) 特に気をつけてほしいこと
 - 5) 医科の情報
 - 9) 指導の内容や治療方針
 - 11) 診療の情報

各エリア 右上の入力ボタンをクリックします。
※ 5) 医科の情報のみ、変更・削除したい項目をクリックします。

詳細情報画面が表示されます。
更新日時リストに * が付いている履歴は、
後から更新、削除が可能です。(ユーザ自身で登録したデータになります。)

<画面位置>

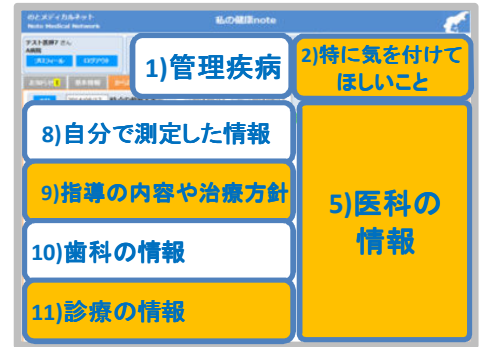

更新日時リストに * が付いている履歴をクリックすると内容が表示されます。

<更新手順①>
内容を更新します。

<更新手順②>
更新ボタンをクリック

<削除手順①>
削除ボタンをクリック

<補足>

- 1) 管理疾病については、(1)と同じ手順で、更新が可能です。
- 8) 自分で測定した情報と、10) 歯科の情報 については、更新・削除はできません。

以上で【4.患者の情報入力】は終わりです。

5.ログアウト

「私の健康note」を終了します。

(1) 「私の健康note」画面のログアウトボタンをクリックします。

のとメディカルネット
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者 選択へ

管理 糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
糖八分目を心掛けてください。お酒は1日ビール1缶まではOKです。
2014/08/13 A病院 歯科医師:テスト医師

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

本日 2014/08/13 時点の最新を表示 2014/05/01 ~ 2014/08/13 グラフ表示 印刷

絞り込み表示⇒ 糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

自分で測定した情報

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	家庭血圧(収縮期)	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭血圧(拡張期)	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭体重	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭腹囲	*データなし*	---/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭血糖	*データなし*	---/--/--

医科の情報

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	身長	160.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	体重	65.0 kg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	BMI(計算)	25.39	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	腹囲	80.0 cm	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	収縮期血圧	137.0 mmHg	2014/08/13
<input type="checkbox"/>	拡張期血圧	87.0 mmHg	2014/08/13

糖尿病の合併症

チェック	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	糖尿病網膜症	あり (眼科受診中)	2014/08/13

指導の内容や治療方針

服薬の習慣をつけて、全体的に数値を下げていきましょう。
食事は栄養指導を元に3食しっかり食べてください。その代り、間食

(2) 終了の確認メッセージが表示されますので、はいボタンをクリックします。

以上で【5.ログアウト】は終わりです。

6.緊急時・災害時

私の健康noteは、医療従事者のHPKIカードで利用者の認証(ログイン)を行い、患者さんの会員カードの提示を受けることで、患者さんの情報にアクセスができます。但し、特例として以下のようなケースにおいては、緊急時・災害時モードにより、患者さんの情報にアクセスすることができます。

●利用できるケース

- ・緊急時: 患者さんが救急搬送された等で、患者さんがカードを持っていない場合
- ・災害時: 大きな災害により、災害時と判断された場合
- ・患者カード忘れ: 通常時に、患者さんがカードを忘れた際に患者さんから口頭で許可をもらった場合
- ・ユーザサポート: サポートセンターのみ利用可能です

●利用上の注意事項

- ・緊急時・災害時モードを利用したことを記録します。
緊急時・災害時モードを利用して、誰がいつ情報にアクセスしたかは、患者さん自身が確認可能です。情報の取り扱いにご注意ください。
- ・本事業に参加いただいている全患者さんの情報を検索、閲覧可能になります。

No	ケース	利用環境	HPKIカード	患者会員カード
1	通常時	通常時に利用するパソコン	○	○
2	緊急時	通常時に利用するパソコン	○	—
3	災害時	通常時に利用するパソコン	○	—
		災害時に事業者から配布するパソコン	—	—
4	患者カード忘れ	通常時に利用するパソコン	○	—

○: 必須 —: 無くても利用可

- ・HPKIカードが手元にある場合、利用ケースにかかわらず、HPKIカードでログインしてください。
- ・HPKIカードが手元にない場合、災害時のみ以下の運用で利用が可能です。
事業者側から、災害時用のパソコンを医療機関に配布します。
当該パソコンは、HPKIカードがなくてもログインができます。(端末証明書を利用しています)
パソコンと合わせて配布する台帳に、利用都度必要事項を記入し、システムをご利用ください。
- ・患者さんから会員カードをの提示を受けた場合、利用ケースに関わらず、会員カードによる情報開示の操作をしてください。
- ・患者さんの会員カードの提示を受けられず、かつ上記利用できるケースに該当する場合は、緊急時・災害時モードに切り替えて利用します。

- (1) 私の健康noteにログインします。
 ※パソコンの起動は、端末起動終了手順(別紙)を参照ください。
 ※私の健康noteへのログインは、本書 1. ログイン の1)～6)を参照ください。
 ※災害時であり、災害時に事業者から配布するパソコンを利用する場合は、HPKIカードがなくてもログインができます。

- (2) 患者選択(一覧)タブをクリックします。

ID	氏名	性別	生年月日	年齢	住所	開示開始日	開示期限	状態
900008	能登 秋子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地	2014/08/14	2014/08/15	
900009	能登 冬子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地	2014/08/14	2014/08/14	

(3) 切り替え事由選択して、緊急時・災害時ボタンをクリックします。

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師さん
A病院
プロフィール ログアウト

お知らせはありません。

患者選択(カード) 患者選択(一覧)

検索条件

利用者ID 承認待ちのみ
患者漢字氏名 検索
患者カナ氏名

緊急時・災害時

緊急時・災害時には、以下の「緊急時・災害時」ボタンを選択する事で、システムに登録されている患者さんの情報を、検索・閲覧する事ができます。緊急時・災害時以外には利用しないでください。

切り替え事由

- 緊急時のため
- 災害時のため
- 患者カード忘れのため
- コーザサポートのため

緊急時・災害時

患者一覧

ID	氏名	性別	生年月日	年齢	住所	開示開始日	開示期限	状態
900008	能登 秋子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地	2014/08/14	2014/08/15	
900009	能登 冬子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地	2014/08/14	2014/08/14	

メッセージを確認して、OKボタンをクリックします。

緊急時・災害時

緊急時・災害時の利用モードに切り替えます。
よろしければ、「次へ」ボタンを選択してください。
(システムにて利用者ログを取得しています。)

OK キャンセル

再度メッセージを確認して、OKボタンをクリックします。

のとメディカルネットワーク
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師さん
A病院
プロフィール ログアウト

お知らせはありません。

患者選択(カード) 患者選択(一覧)

検索条件

利用者ID 承認待ちのみ
患者漢字氏名 検索
患者カナ氏名

緊急時・災害時

緊急時・災害時には、以下の「緊急時・災害時」ボタンを選択する事で、システムに登録されている患者さんの情報を、検索・閲覧する事ができます。緊急時・災害時以外には利用しないでください。

通常時

患者一覧

検索条件を入力してください。

情報

✓ 災害時・緊急時モードに切り替えました。

OK

- (4) 検索条件を入力して、検索ボタンをクリックします。
 検索条件は、いずれか1つ入力が必要です。

- ・利用者ID : 患者さんの会員番号を入力してください。
- ・患者漢字氏名 : 患者さんの氏名(漢字)を入力してください。
 苗字のみ、名前のみでも検索できます。
 フルネームを入力する場合は、苗字と名前の間にスペースは不要です。
- ・患者カナ氏名 : 患者さんの氏名(カナ)を入力してください。
 苗字のみ、名前のみでも検索できます。
 フルネームを入力する場合は、苗字と名前の間にスペースは不要です。

のとメディカルネット
 Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
 A病院
 プロフィール ログアウト

お知らせはありません。

患者選択(カード) 患者選択(一覧)

検索条件

利用者ID

患者漢字氏名

患者カナ氏名

検索

緊急時・災害時
 緊急時・災害時から通常に戻すには、以下の「通常時」ボタンを選択してください。
 通常時

患者一覧

ID	氏名	性別	生年月日	年齢	住所	開示開始日	開示期限	状態
900001	能登 太郎	男	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900002	能登 二郎	男	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900003	能登 三郎	男	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900004	能登 四郎	男	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900005	能登 五郎	男	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900006	能登 春子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900007	能登 夏子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地			
900008	能登 秋子	女	昭和44年7月4日	45歳	石川県市区町村番地	2014/08/14	2014/08/15	

- (5) 目的の患者さんの行をクリックすると、患者さんのページが表示されます。
画面に表示される内容は、通常時と同じです。(画面の背景が赤色に変わります。)

のとメディカルネット
Noto Medical Network

私の健康note

テスト医師 さん
A病院
プロフィール ログアウト

患者 能登 冬子 さん
昭和44年7月4日生 女 45歳
患者選択へ

管理疾病
糖尿病 高血圧症
脂質異常症 CKD
入力

特に気を付けてほしいこと
入力
腹八分目を心掛けてください。お酒は1日ビール1缶までOKです。
2014/08/13 A病院 薬剤師 三ツ田 麻理

お知らせ 基本情報 からだの情報 健診の情報 お薬の情報 関連リンク

本日 2014/08/14 時点の最新を表示 2014/05/01 ~ 2014/08/14 グラフ表示 印刷

絞り込み表示⇒ 糖尿病 高血圧症 脂質異常症 CKD

自分で測定した情報

測定した値	項目	値	更新日
<input type="checkbox"/>	家庭血圧(収縮期)	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭血圧(拡張期)	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭体重	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭腹囲	*データなし*	----/--/--
<input type="checkbox"/>	家庭血糖	*データなし*	----/--/--

医科の情報
目標値入力 一括入力

体の基本情報

項目	値	更新日
身長	160.0 cm	2014/08/13
体重	65.0 kg	2014/08/13
BMI(計算)	25.39	2014/08/13
腹囲	80.0 cm	2014/08/13
収縮期血圧	137.0 mmHg	2014/08/13
拡張期血圧	87.0 mmHg	2014/08/13

糖尿病の合併症

項目	値	更新日
糖尿病網膜症	あり (眼科受診中)	2014/08/13

指導の内容や治療方針
入力
服薬の習慣をつけて、全体的に数値を下げてください。
食事は栄養指導を元に3食しっかり食べてください。その代り間食


- (6) 患者さんの情報の参照や入力を行います。
入力できる項目は、通常時と同じです。
4.患者の情報入力 を参照ください。
- (7) 入力が終了したら、患者選択(一覧)画面に戻り、通常時ボタンをクリックしてください。
続けて別の患者さんを選択する場合は、(4)～(6)を繰り返してください。

以上で【6.緊急時・災害時】は終わりです。

7.複数人でのシステム利用

1台の実証端末を複数人で使用される場合には、それぞれログイン／ログアウトを実施していただく必要があります。

- (1) ログイン中に、別の人でログインする場合には、画面左上のログアウトボタンをクリックして、一旦、ログアウトした後、次の人でログインを行ってください。

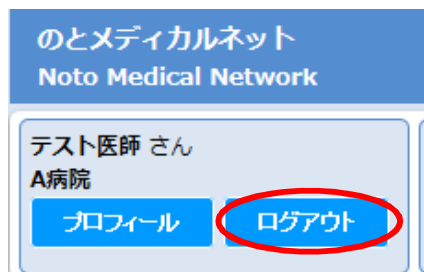


以上で【7.複数人でのシステム利用】は終わりです。

8.ログインエラー


ログイン時に、エラーが発生することがあります。
エラーの内容とその対策について記載します。

(1) ネットワークエラー

- ① Internet Explorerの画面が表示されますので、[×]ボタンで閉じます。

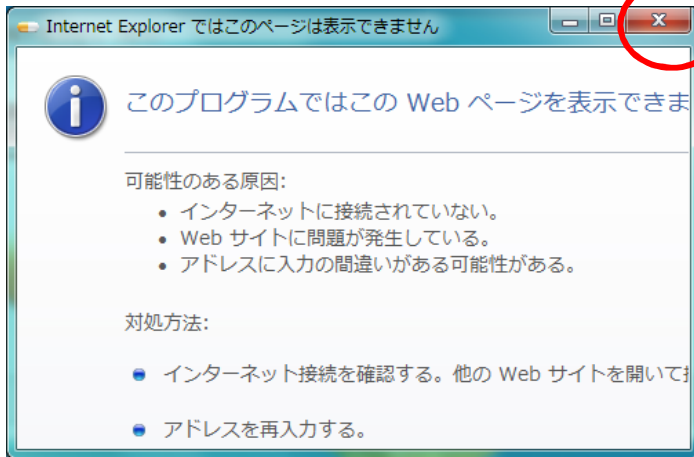

- ② ネットワークエラー画面が表示されますので、[OK]ボタンで閉じます。

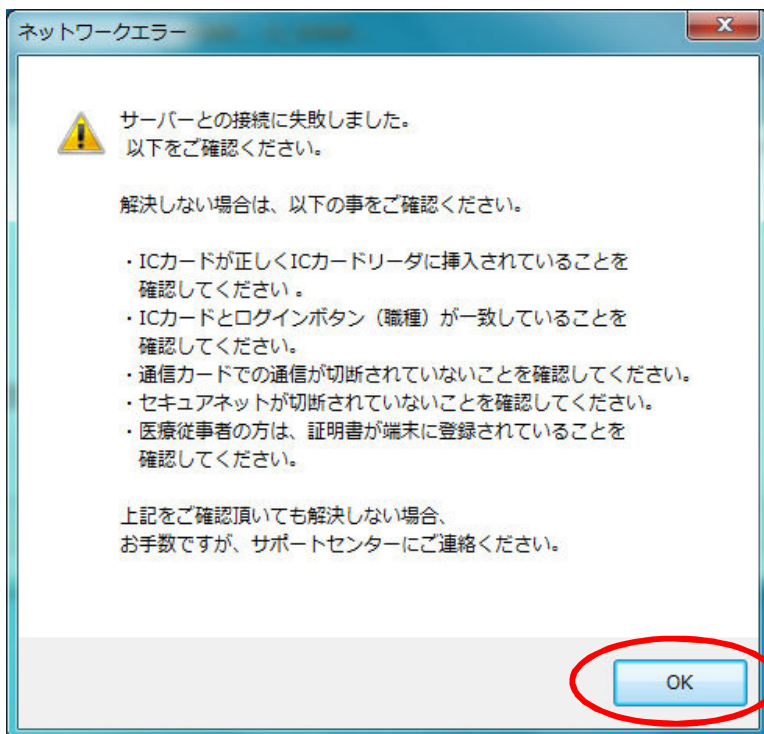


<確認点>

- ・ ICカードが正しく挿入されていること(差し忘れ、不十分な挿入)を確認してください。
 - ・ インターネットが接続されていることを確認してください。
 - ・ USBトークンが正しく接続されていることを確認してください。
 - ・ セキュアネットワークサービスに正しく接続されていることを確認してください。
- 解決しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

(2) ID管理システムに登録されていないエラー

- ① エラー画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

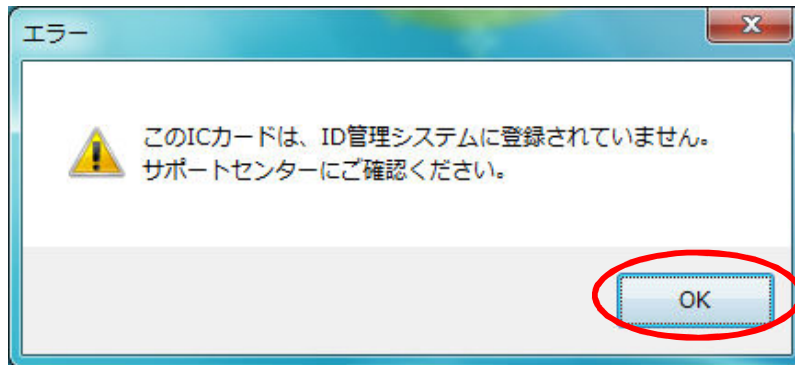

<確認点>

- ・ ICカードの利用者情報が、ID管理システムに登録されていない可能性があります。サポートセンターへお問い合わせください。

(3) PIN間違いエラー

- ① エラー画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



<確認点>

- ・ PINを確認してください。

以上で【8.ログインエラー】は終わりです。

・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他、本文中に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。