


ゆうパック 常温輸送の場合

ゆうパックで送る場合は、健感発11107第8号(平成23年11月7日)、健感発0315第1号(平成24年3月15日)別添に従って、三重梱包したものを四次容器に入れます。

一次容器


一次容器には、中に入っている病原体等の必要な情報が記載されたラベルを添付する。

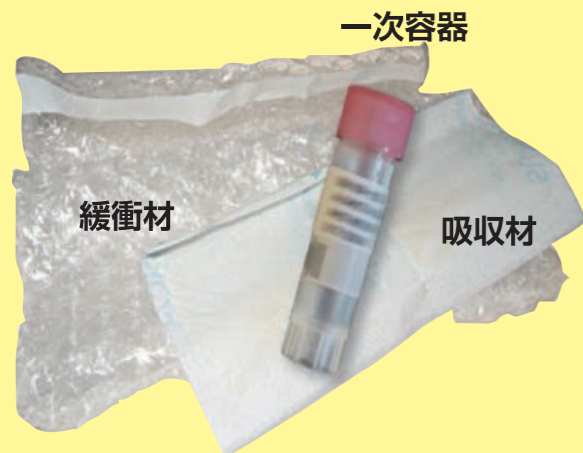

キャップが外れないようシーリングする。チューブを用いる場合は密閉性の高い「外ネジ」タイプ推奨。



シールした一次容器を緩衝材で包む。

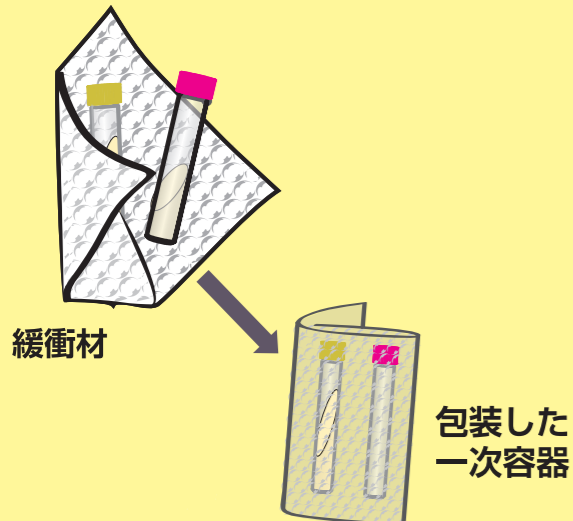

二次容器

二次容器は密閉型。

包装した一次容器と一緒に中の液体全部を吸収できる十分量の吸収材を入れる。




包装した一次容器が二次容器の中で動かないよう、すき間を緩衝材でうめる。




三次容器

検体送付状は三次容器に入れる。

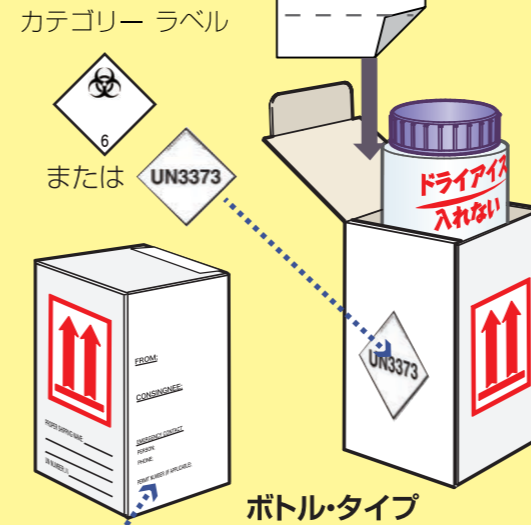

FROM: 送り主の住所・氏名
 CONSIGNEE: 受取人の住所・氏名
 EMERGENCY CONTACT PERSON: 緊急時連絡先の氏名
 PHONE: 24時間対応可能なTEL

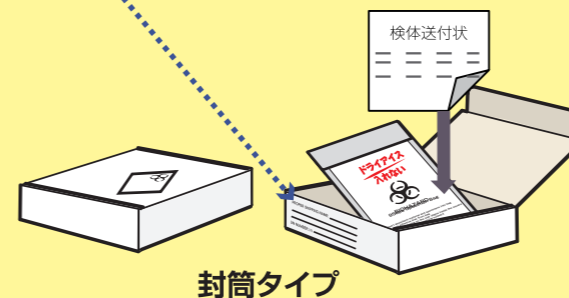

四次容器 (オーバーパック)

安全性適正包装確認済みシールと送り状を四次容器の上面に貼付。




安全性適正包装確認済みシール

安全性適正包装確認済み
 平成〇〇年〇〇月〇〇日
 包装責任者: △△ △△
 機関名: 〇〇衛生研究所



四次容器にも三次容器と同様のラベルを貼付。

カテゴリー ラベル

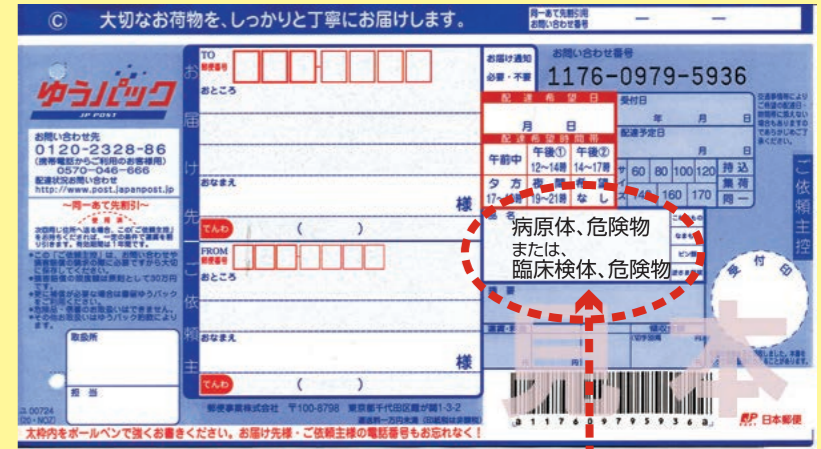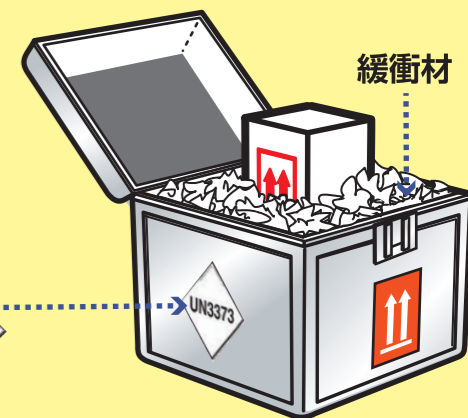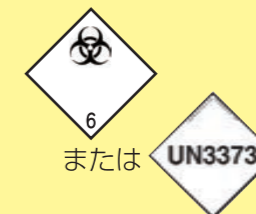

送り状 品名欄に「病原体、危険物」または「臨床検体、危険物」と記載。

ゆうパック用の四次容器(ジュラルミン等)を使用。