

PMDA 医療安全情報No. 12  
止血用圧迫帯（止血用カフ）の誤接続使用について

# PMDA 医療安全情報

(独)医薬品医療機器総合機構




No.12 2009年 9月

## 止血用圧迫帯（止血用カフ）の 誤接続使用について

### POINT 安全使用のために注意するポイント

**(事例 1)** 止血用圧迫帯（止血用カフ）を圧迫するために使用する専用加圧器を空気注入口に接続せず、空気の入っている注射用シリンジを使用したために、誤ってカテーテルイントロドューサ（シース）の三方活栓の薬液注入口に接続して血管内に空気を注入させてしまった。

#### 1 止血用圧迫帯（止血用カフ）使用時の注意事項 その1

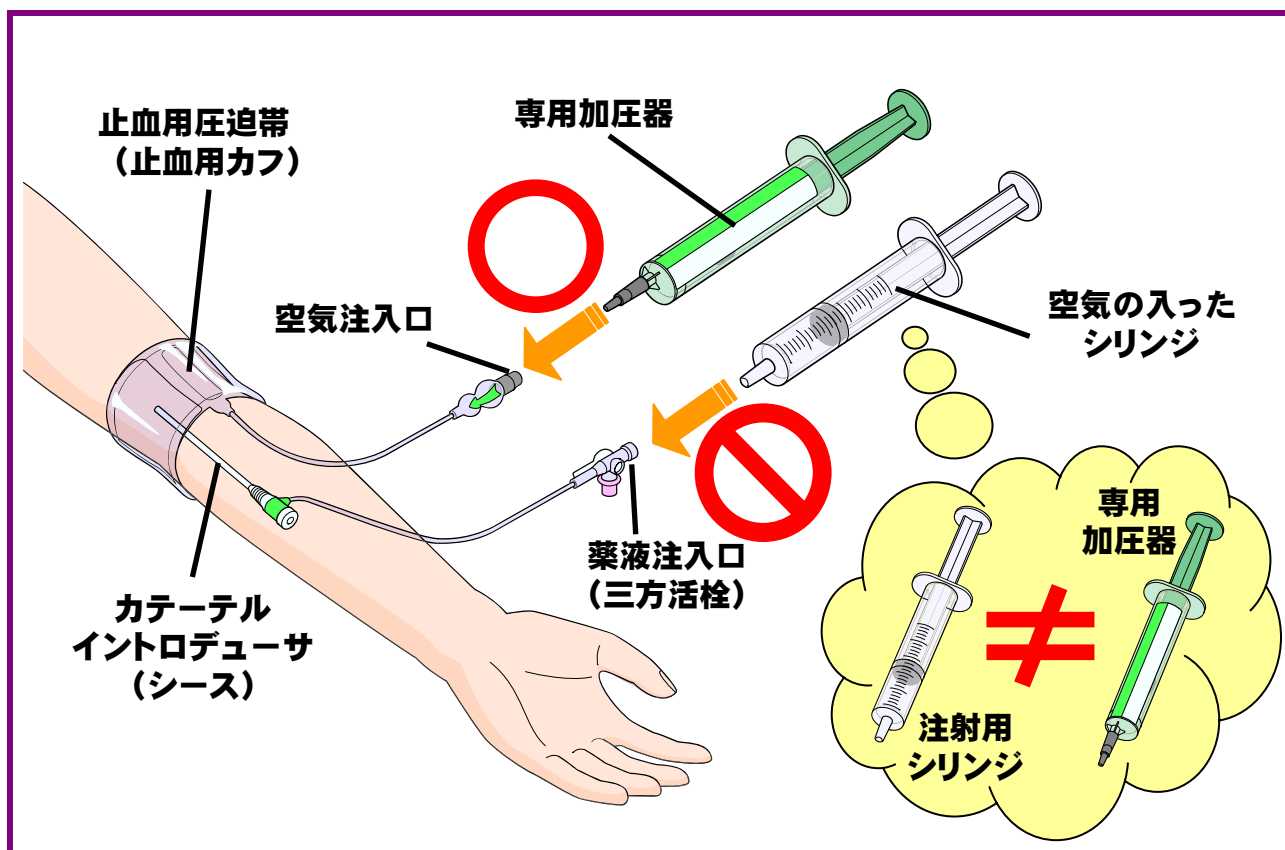

止血用圧迫帯（止血用カフ）の使用時には、「専用加圧器」を使うこと！  
一般の注射用シリンジを使用しないでください！

