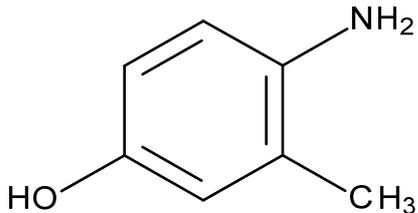


微生物を用いる変異原性試験結果報告書

1. 一般的事項

新規化学物質の名称 (IUPAC 命名法による)	4-アミノ-m-クレゾール		
別名	アルキル (C=1~4) -アミノフェノール		
構造式又は示性式 (いずれも不明な場合はその製法の概要)			
試験に供した新規化学物質の純度	99.7%	試験に供した新規化学物質の Lot No.	LKG6033
不純物の名称及び濃度	/		
CAS 番号	2835-99-6	蒸気圧	/
分子量	123.15	分配係数	/
融点	177-179°C	常温における性状	褐色の結晶性粉末
沸点	/		
安定性	/		
溶媒に対する溶解度等	溶媒	溶解度	溶媒中での安定性
	水	50 mg/mL で不溶	発熱、ガスの発生等の反応性なし
	DMSO	50 mg/mL で溶解	発熱、ガスの発生等の反応性なし
	アセトン	/	
	その他	/	

(備考) 上記被験物質情報は、製造元からの情報及び独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報システム (CHRIP) の情報による。なお、溶解度及び溶媒中の安定性については、株式会社ボゾリサーチセンターで実施した溶解性試験の結果である。

2. 試験に用いた菌株

菌株名	入手先	入手年月日
<i>Salmonella typhimurium</i> TA98	国立医薬品食品衛生研究所	1997年10月9日
<i>Salmonella typhimurium</i> TA100	国立医薬品食品衛生研究所	1997年10月9日
<i>Salmonella typhimurium</i> TA1535	国立医薬品食品衛生研究所	1997年10月9日
<i>Salmonella typhimurium</i> TA1537	国立医薬品食品衛生研究所	1997年10月9日
<i>Escherichia coli</i> WP2 <i>uvrA</i>	独立行政法人 製品評価技術基盤機構	2011年10月20日

3. S9 Mix

(1) S9の入手方法等

自製・購入の別	1.自製 ② 購入（製造元：キッコーマンバイオケミファ株式会社）
製造年月日	2016年10月7日製造
購入の場合 Lot No.	RAA201610A
保存温度	-85.6~-78.7°C (保存期間：2016年11月22日~2017年1月11日)

(2) S9の調製方法

使用動物		誘導物質	
種・系統	ラット・SD系	名称	PB& 5,6-BF
性	雄	投与方法	腹腔内投与
週齢	7週齢	投与期間及び 投与量 (mg/kg 体重)	PB4日間連続投与: 30+60+60+60(mg/kg 体重) PB投与3日目BF投与: 80(mg/kg 体重)
体重	194-246 g		

(3) S9Mixの組成

成分	S9Mix 1mL 中の量	成分	S9Mix 1mL 中の量
S9	0.1 mL	NADPH	4 μmol
MgCl ₂	8 μmol	NADH	4 μmol
KCl	33 μmol	Na-リン酸緩衝液	100 μmol
グルコース-6-リン酸	5 μmol	その他 ()	

4. 被験物質溶液の調製

使用溶媒	名称	製造元	Lot No.	グレード	純度(%)
	DMSO	和光純薬工業株式会社	DSH0997	JIS規格 試薬特級	99.0%以上
溶媒選択の理由	水及び DMSO について溶解性試験を実施した。その結果、水の 50 mg/mL では不溶であったが、DMSO の 50 mg/mL で溶解し、発熱、ガスの発生等の反応性も認められなかったため、DMSO を溶媒として試験を実施した。なお、被験液の調製には、モレキュラシーブス 4A 1/16(和光純薬工業株式会社; Lot No. HWG7622) で脱水した DMSO を使用した。				
被験物質溶液の性状	<input checked="" type="radio"/> 溶解 <input type="radio"/> 懸濁 <input type="radio"/> その他				
被験物質が難溶性の場合における懸濁等の方法	/				
溶液の調製から使用までの保存時間と温度	用時調製・室温				
純度換算の有無	有 <input checked="" type="radio"/> 無				

5. 前培養の条件

(1) 条件

ニュートリエントブロス	名称	製造元	Lot No.
	Nutrient Broth No.2	OXOID LTD.	1239615
前培養時間	9時間		
培養容器(形状・容器)	L字管・48mL		
培養液量	10 mL	接種菌量	<i>S. typhimurium</i> 株 20 µL <i>E. coli</i> 株 10 µL

(2) 前培養終了時の生菌数等

菌株名		塩基対置換型			フレームシフト型	
		TA100	TA1535	WP2 <i>uvrA</i>	TA98	TA1537
生菌数 ($\times 10^9$ /mL)	用量設定試験	4.45	4.77	8.71	5.94	3.63
	本試験	4.14	4.80	7.01	5.63	3.65
	追加確認試験	4.25	4.78	/	/	/
測定方法		① O.D.値より換算 ② 段階希釈法 ③ その他				

6. 最小グルコース寒天平板培地

自製・購入の別	1. 自製 ② 購入 (購入元 極東製薬工業株式会社)
製造年月日	2016年10月21日製造 ¹⁾ 、2016年11月15日製造 ²⁾³⁾
購入の場合の Lot No.	DZLHLAL01 ¹⁾ 、DZLHBF01 ²⁾ 、DZLHBF02 ³⁾
使用寒天の名称・製造・Lot No.	OXOID AGAR No.1・OXOID LTD.・Lot No. 1365423 ¹⁾ 1372870 ²⁾³⁾

1) 用量設定試験に使用 2) 本試験に使用 3) 追加確認試験に使用

7. 試験の方法

(1) 試験方法とその選択理由

採用した試験方法	① プレインキュベーション法 2. プレート法 3. その他
その他の場合は その選択理由	

(2) 試験条件

組 成	菌懸濁液	0.1 mL
	被験物質溶液	0.1 mL
	Na-リン酸緩衝液 (直接法による場合)	0.5 mL
	S9Mix (代謝活性化法による場合)	0.5 mL
	トップアガー	2.0 mL
プレインキュベーション	温度	37°C
	時間	20 分間
インキュベーション	温度	37°C
	時間	48 時間

8. コロニー計測の方法

計測方法	1. マニュアル計測 ② 機器計測
補正の有無	1. 無 ② 有 (補正の方法 面積補正:補正值 1.21)

9. 試験の結果

- (1) 試験の結果は別表による。
- (2) 結果の判定

判 定	陽性	陰性
<p>判定の理由</p> <p>用量設定試験の結果を別表 1 に、本試験の結果を別表 2 に、追加確認試験の結果を別表 3 に、比活性を別表 4 に示した。なお、図 1~10 は別表 2 より、図 11、12 は別表 3 より作成した。また、当該試験の参考データとして参照した背景データを Attached Data として添付した。</p> <p>用量設定試験及び追加確認試験ともに代謝活性化しない場合の <i>S. typhimurium</i> TA100、TA1535 において、陰性対照値の 2 倍以上となる復帰変異コロニー数の用量依存性を伴う増加が認められ再現性を示した。なお、最大比活性値は、用量設定試験の代謝活性化しない場合の <i>S. typhimurium</i> TA100 の 2.42×10^3 (Rev/mg) であった。</p> <p>一方、陽性対照群では陰性対照群と比較して 2 倍以上となる復帰変異コロニー数の増加を示したことから、使用菌株の復帰突然変異誘発物質に対する反応は適切であったことが確認され、試験は適切に実施されたものと考えられた。</p> <p>以上の試験結果より、本試験条件下において 4-アミノ-m-クレゾールは、微生物に対する遺伝子突然変異誘発能を有する（陽性）と判定した。</p>		

(3) 参考事項

本被験物質によるプレート上の沈殿は代謝活性化の有無にかかわらず、いずれの用量においても認められなかった。本被験物質によるプレート上の着色は、代謝活性化しない場合の 313 µg/plate 以上、代謝活性化した場合の 1250 µg/plate 以上の用量で認められた。

菌に対する生育障害は、代謝活性化しない場合の *S. typhimurium* TA1535 の 120 µg/plate 以上、*S. typhimurium* TA100 の 140 µg/plate 以上、代謝活性化しない場合の *S. typhimurium* TA98、TA1537、*E. coli* WP2 *uvrA* 及び代謝活性化した場合のすべての菌株の 156 µg/plate 以上の用量で認められた。

代謝活性化しない場合の *S. typhimurium* TA100、TA1535 については、復帰変異コロニー数の陰性対照値の 2 倍以上の増加に再現性が得られなかったため、追加確認試験を実施し、再現性の確認をした。用量段階は復帰変異コロニー数の陰性対照値の 2 倍以上となる増加が認められた用量を参考に、20~160 µg/plate の範囲で公差 20 による計 8 用量を設定した。

被験液の調製及び試験操作は、紫外線吸収膜付蛍光灯下で実施した。

(別表1)

試験結果表(用量設定試験)

被験物質の名称: 4-アミノ-m-クレゾール

No. T-2291

試験実施期間		2016年12月22日 より 2016年12月26日				
代謝活性化系の有無	被験物質の用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	復帰変異数(コロニー数/プレート)				
		塩基対置換型			フレームシフト型	
		TA100	TA1535	WP2uvrA	TA98	TA1537
S9Mix (-)	陰性対照 (DMSO)	107 103 (105)	8 12 (10)	36 38 (37)	18 22 (20)	7 7 (7)
	1.22	100 105 (103)	11 4 (8)	27 33 (30)	18 20 (19)	10 5 (8)
	4.88	107 97 (102)	7 4 (6)	25 30 (28)	13 16 (15)	5 7 (6)
	19.5	97 91 (94)	8 8 (8)	33 41 (37)	19 20 (20)	4 5 (5)
	78.1	313 274 (294)	19 22 (21)	42 37 (40)	17 12 (15)	10 7 (9)
	313	0* 0* (0)	0* 0* (0)	4* 15* (10)	0* 0* (0)	0* 0* (0)
	1250	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)
	5000	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)
	S9Mix (+)	陰性対照 (DMSO)	109 121 (115)	13 11 (12)	31 33 (32)	21 19 (20)
1.22		118 104 (111)	9 10 (10)	35 33 (34)	24 30 (27)	10 7 (9)
4.88		126 112 (119)	7 7 (7)	30 28 (29)	24 31 (28)	8 8 (8)
19.5		93 118 (106)	4 8 (6)	49 26 (38)	23 25 (24)	11 4 (8)
78.1		125 112 (119)	8 10 (9)	41 24 (33)	23 30 (27)	10 5 (8)
313		90* 91* (91)	8* 5* (7)	30* 42* (36)	27* 13* (20)	8* 3* (6)
1250		64* 69* (67)	9* 6* (8)	35* 51* (43)	12* 10* (11)	9* 8* (9)
5000		0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)	0* 0* (0)
陽性対照		名称	AF-2	SAZ	AF-2	AF-2
	用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	0.01	0.5	0.01	0.1	1.0
	コロニー数/プレート	548 483 (516)	228 266 (247)	100 80 (90)	396 329 (363)	1457 1551 (1504)
	名称	B[a]P	2AA	2AA	B[a]P	B[a]P
	用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	5.0	2.0	10.0	5.0	5.0
	コロニー数/プレート	712 730 (721)	241 225 (233)	806 799 (803)	407 335 (371)	113 122 (118)

(備考)

AF-2 : 2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド

SAZ : アジ化ナトリウム

ICR-191 : 2-メトキシ-6-クロロ-9-[3-(2-クロロエチル)アミノプロピルアミノ]アクリジン・2HCl

2AA : 2-アミノアントラセン

B[a]P : ベンゾ[a]ピレン

*: 被験物質による生育阻害が認められたことを示す。

()内は、2枚のプレートの平均値を示す。

(別表2)

試験結果表 (本試験)

被験物質の名称: 4-アミノ-m-クレゾール

No. T-2291

試験実施期間		2017年1月10日 より 2017年1月13日				
代謝活性化系の有無	被験物質の用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	復帰変異数(コロニー数/プレート)				
		塩基対置換型			フレームシフト型	
		TA100	TA1535	WP2uvrA	TA98	TA1537
S9Mix (-)	陰性対照 (DMSO)	104 104 (104)	15 10 (13)	26 36 (31)	12 18 (15)	10 7 (9)
	9.77	99 85 (92)	10 7 (9)	29 25 (27)	16 15 (16)	4 8 (6)
	19.5	100 97 (99)	13 5 (9)	19 23 (21)	11 11 (11)	6 10 (8)
	39.1	115 143 (129)	6 8 (7)	22 27 (25)	12 15 (14)	4 7 (6)
	78.1	154 150 (152)	10 12 (11)	32 32 (32)	11 13 (12)	5 8 (7)
	156	60 * 90 * (75)	2 * 3 * (3)	15 * 27 * (21)	4 * 10 * (7)	0 * 0 * (0)
	313	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)
	S9Mix (+)	陰性対照 (DMSO)	132 103 (118)	15 11 (13)	29 34 (32)	27 31 (29)
9.77		117 123 (120)	6 6 (6)	33 33 (33)	24 34 (29)	8 4 (6)
19.5		101 120 (111)	10 15 (13)	21 21 (21)	34 22 (28)	3 7 (5)
39.1		110 124 (117)	12 15 (14)	29 27 (28)	27 38 (33)	8 4 (6)
78.1		100 118 (109)	15 8 (12)	29 23 (26)	42 38 (40)	4 11 (8)
156		116 * 143 * (130)	8 * 8 * (8)	24 * 26 * (25)	28 * 38 * (33)	5 * 7 * (6)
313		96 * 99 * (98)	9 * 5 * (7)	23 * 10 * (17)	13 * 22 * (18)	0 * 0 * (0)
陽性対照		名称	AF-2	SAZ	AF-2	AF-2
	用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	0.01	0.5	0.01	0.1	1.0
	コロニー数/プレート	534 589 (562)	222 238 (230)	74 87 (81)	361 338 (350)	1250 1020 (1135)
	名称	B[a]P	2AA	2AA	B[a]P	B[a]P
	用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	5.0	2.0	10.0	5.0	5.0
	コロニー数/プレート	946 1030 (988)	249 252 (251)	623 692 (658)	355 368 (362)	106 110 (108)

(備考)

AF-2 : 2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド

SAZ : アジ化ナトリウム

ICR-191 : 2-メトキシ-6-クロロ-9-[3-(2-クロロエチル)アミノプロピルアミノ]アクリジン・2HCl

2AA : 2-アミノアントラセン

B[a]P : ベンゾ[a]ピレン

* : 被験物質による生育阻害が認められたことを示す。

()内は、2枚のプレートの平均値を示す。

(別表3)

試験結果表 (追加確認試験)

被験物質の名称 : 4-アミノ-m-クレゾール

No. T-2291

試験実施期間		2017年1月24日 より 2017年1月27日	
代謝活性化系の有無	被験物質の用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)	復帰変異数(コロニー数/プレート)	
		塩基対置換型	
		TA100	TA1535
S9Mix (-)	陰性対照 (DMSO)	120 101 (111)	7 11 (9)
	20	97 100 (99)	7 6 (7)
	40	97 98 (98)	4 11 (8)
	60	117 102 (110)	14 10 (12)
	80	109 119 (114)	20 23 (22)
	100	266 299 (283)	21 17 (19)
	120	320 304 (312)	0 * 0 * (0)
	140	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)
	160	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)
	陽性対照	名称	AF-2
用量 ($\mu\text{g}/\text{プレート}$)		0.01	0.5
コロニー数/プレート		548 500 (524)	307 285 (296)

(備考)

AF-2 : 2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド

SAZ : アジ化ナトリウム

* : 被験物質による生育阻害が認められたことを示す。

()内は、2枚のプレートの平均値を示す。

(別表4)

比活性

被験物質の名称：4-アミノ-m-クレゾール

No. T-2291

	菌株名	-S9Mix		+S9Mix	
		比活性	計算に使用した用量 ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	比活性	計算に使用した用量 ($\mu\text{g}/\text{plate}$)
用量設定試験	TA100	2.42×10^3	78.1		
	TA1535	1.41×10^2	78.1		
	WP2 <i>uvrA</i>				
	TA98				
	TA1537				
本試験	TA100				
	TA1535				
	WP2 <i>uvrA</i>				
	TA98				
	TA1537				
追加確認試験	TA100	1.72×10^3	100		
	TA1535	1.63×10^2	80		

図 1

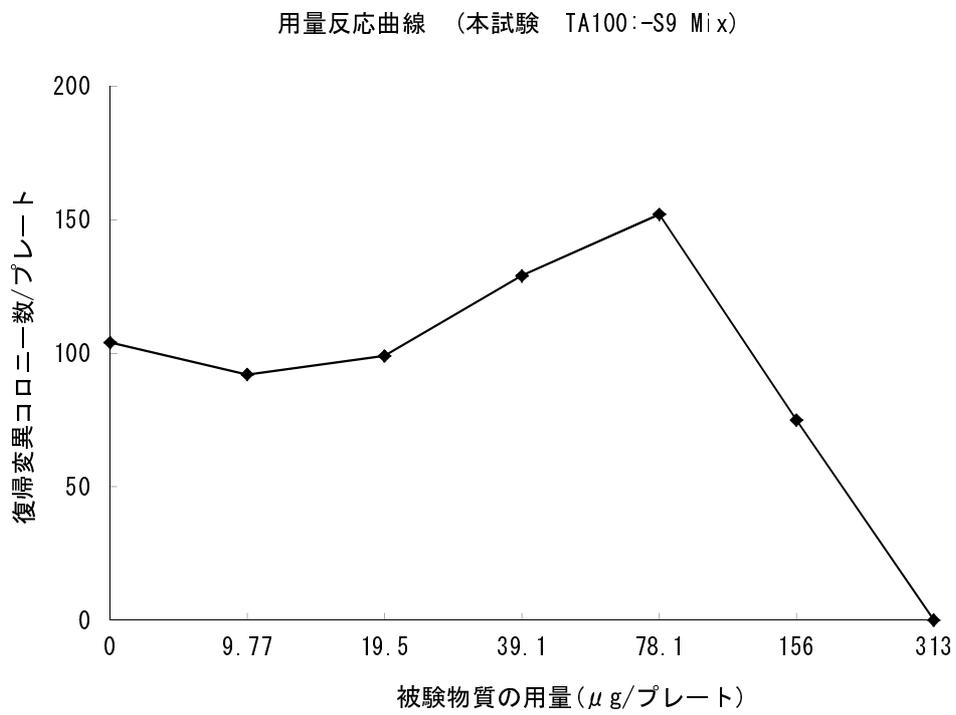


図 2

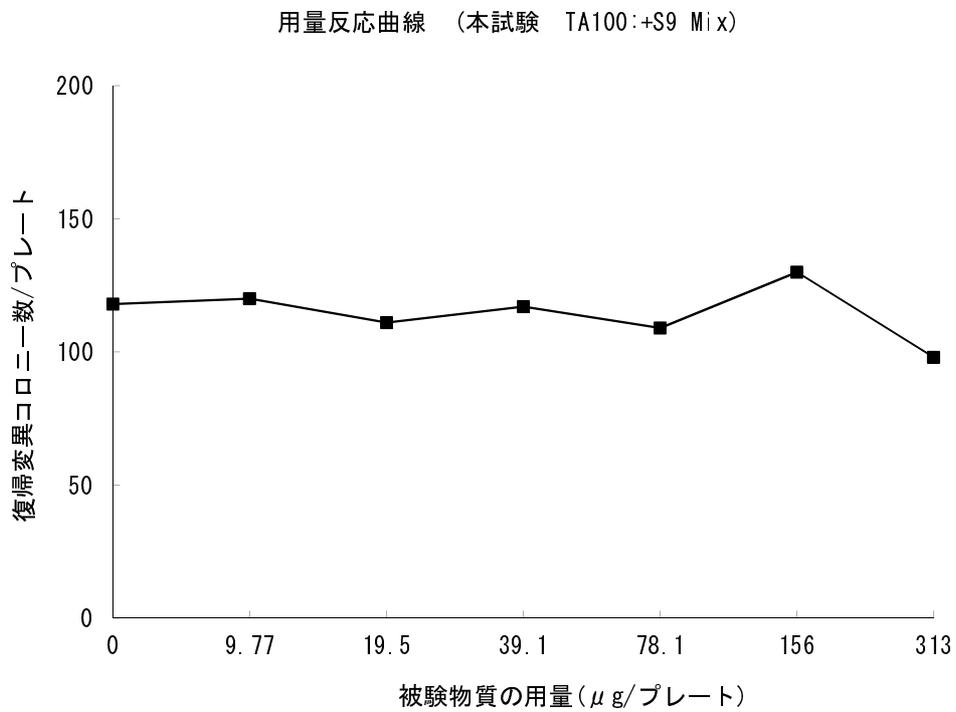


図 3

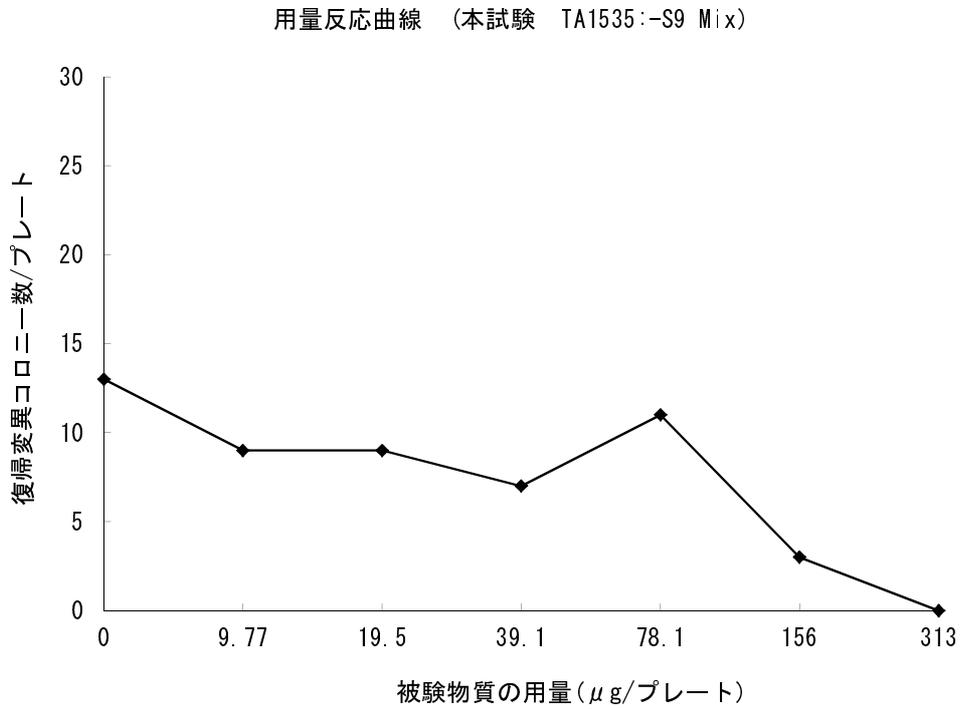


図 4

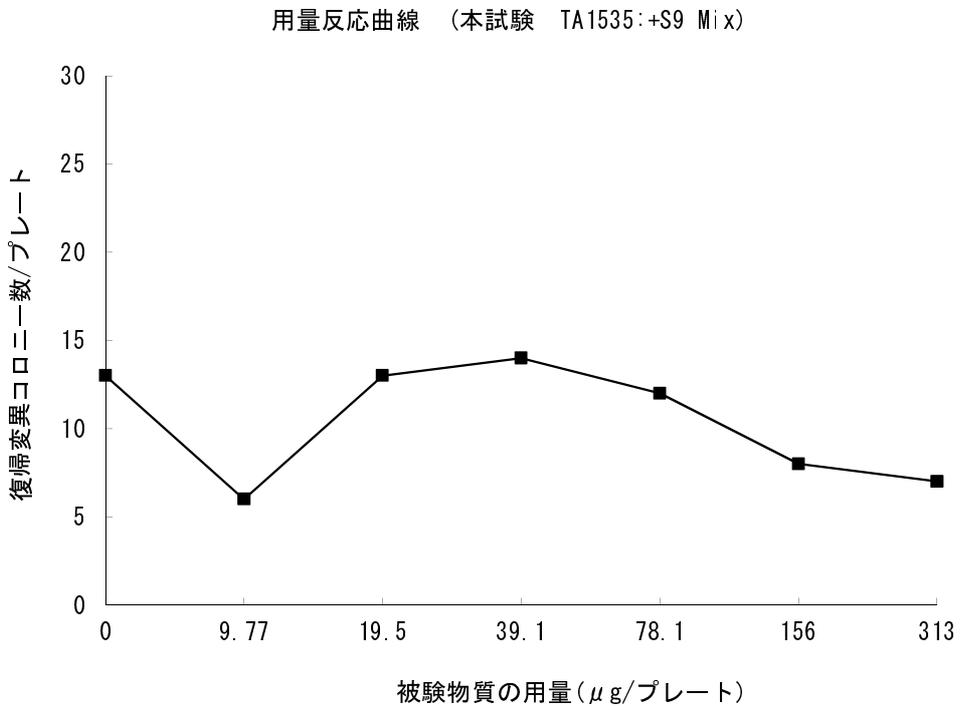


図 5

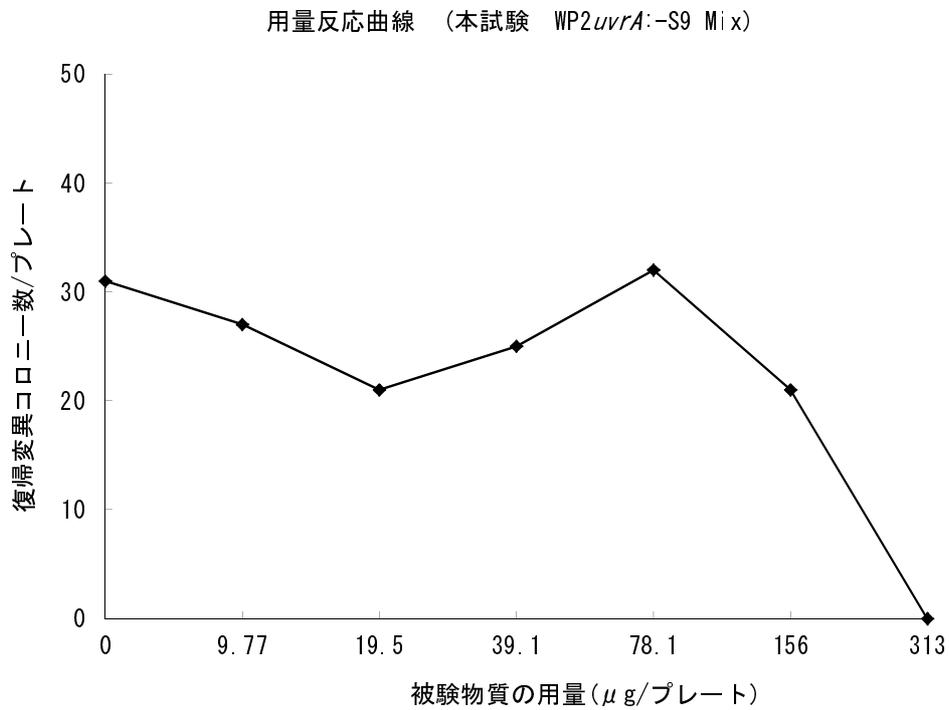


図 6

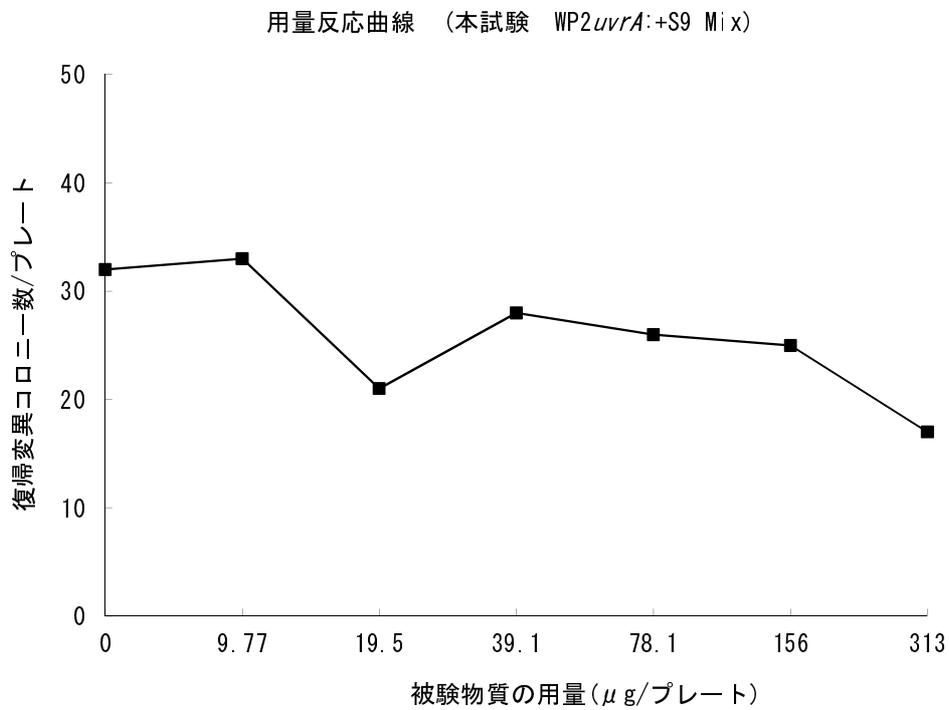


図 7

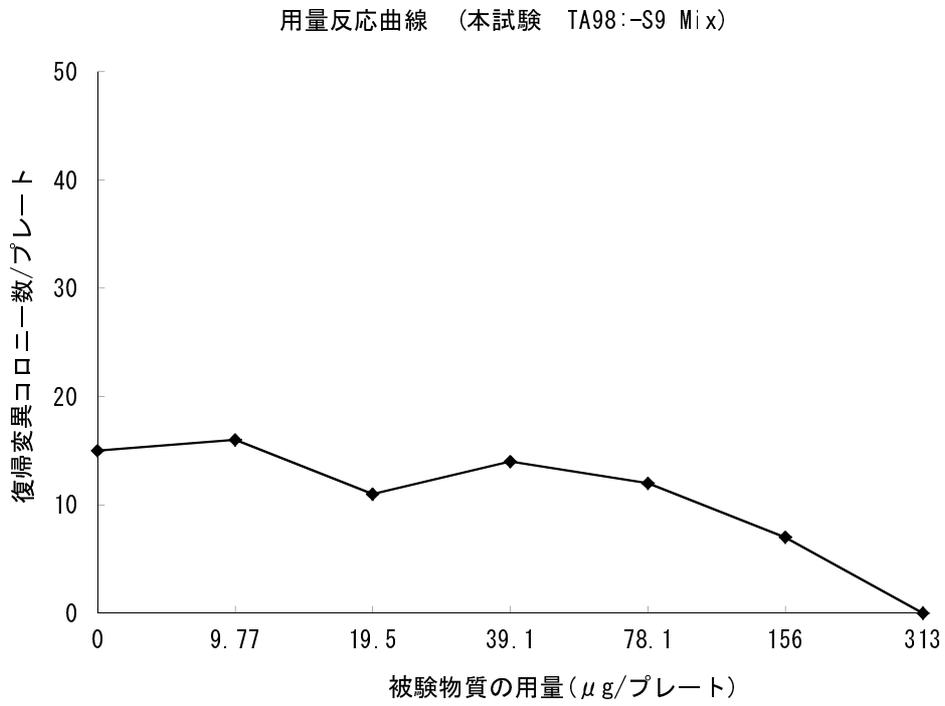


図 8

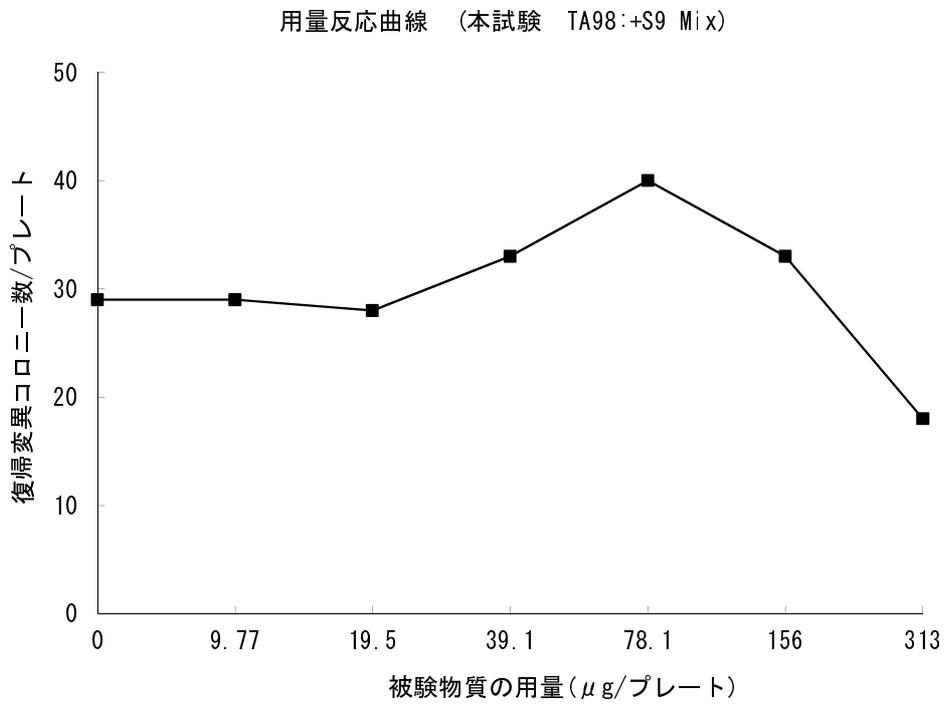


図 9

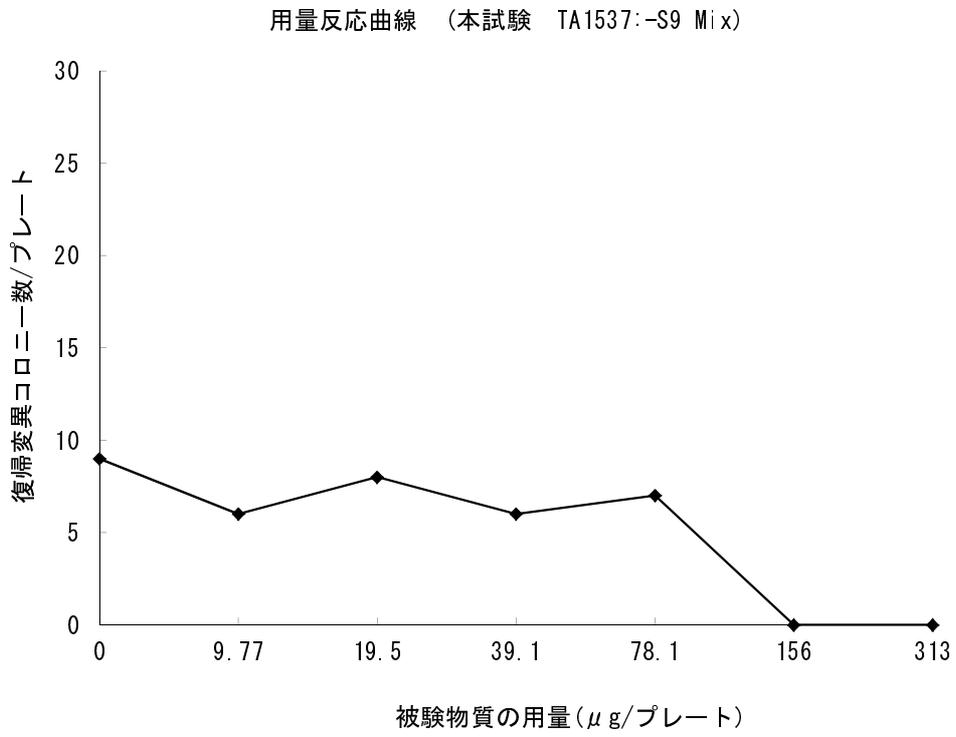


図 10


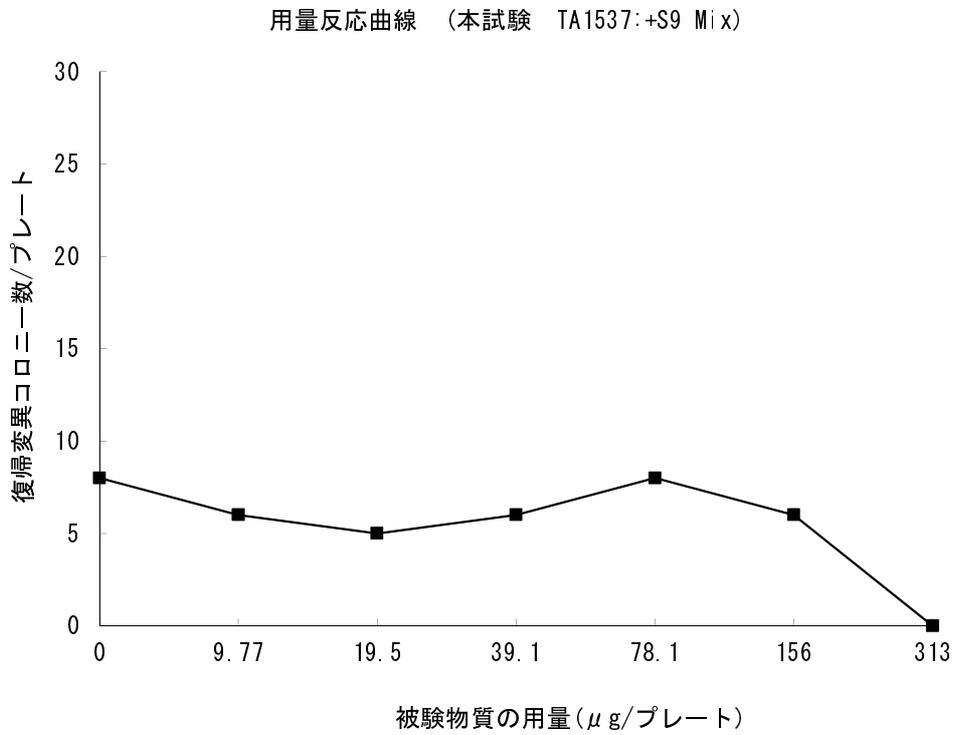


図 11

用量反応曲線 (追加確認試験 TA100:-S9 Mix)

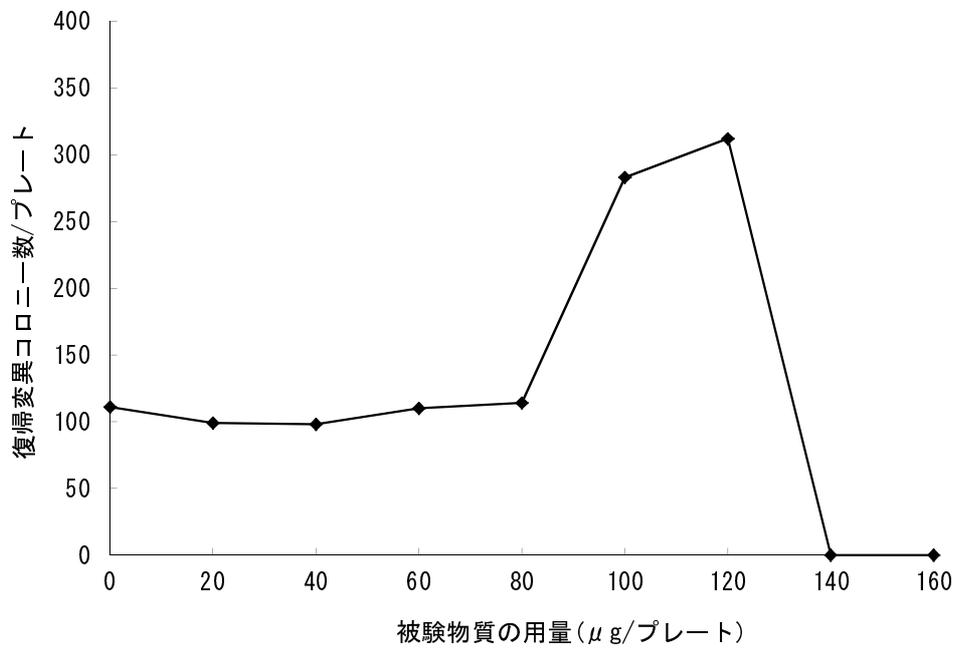

**Background Data of the reverse mutation tests in bacteria
at the Tokyo Laboratory of the BoZo Research Center Inc.**

CODE No. :160908

(Pre-incubation Method)

Tester Strains	S9 Mix (-) or (+)	Classification	Mean	S.D.	Management ranges		Number of plates
					Lower limit	Upper limit	
TA100	-	Solvent control	117	13.7	76	158	102
		Positive control AF-2(0.01 µg/plate)	547	71.8	331	762	102
	+	Solvent control	132	17.2	80	183	102
		Positive control B[a]P(5.0 µg/plate)	891	126	512	1269	102
TA1535	-	Solvent control	9	2.60	1	17	102
		Positive control SAZ(0.5 µg/plate)	233	26.4	154	312	102
	+	Solvent control	10	2.75	2	18	102
		Positive control 2AA(2.0 µg/plate)	258	34.1	156	360	102
WP2uvrA	-	Solvent control	27	3.98	15	39	102
		Positive control AF-2(0.01 µg/plate)	71	6.4	52	91	102
	+	Solvent control	30	4.41	17	44	102
		Positive control 2AA(10.0 µg/plate)	718	114	375	1062	102
TA98	-	Solvent control	18	3.50	7	28	102
		Positive control AF-2(0.1 µg/plate)	346	57.1	174	517	102
	+	Solvent control	32	5.45	15	48	102
		Positive control B[a]P(5.0 µg/plate)	384	46.4	245	523	102
TA1537	-	Solvent control	8	2.36	1	15	102
		Positive control ICR-191(1.0 µg/plate)	1011	193	431	1590	102
	+	Solvent control	10	2.55	2	17	102
		Positive control B[a]P(5.0 µg/plate)	110	12.1	73	146	102

(Notice)

Solvent controls Water, Dimethylsulfoxide(DMSO) and Acetone

Positive controls AF-2 : 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide

SAZ : Sodium azide

ICR-191 : 2-methoxy-6-chloro-9-[3-(2-chloroethyl)aminopropylamino]acridine·2HCl

B[a]P : Benzo[a]pyrene

2AA : 2-aminoanthracene

S9 Mix (-) : without metabolic activation

(+) : with metabolic activation