

T-G310



## 最 終 報 告 書

アルカン酸 (C=4~30) の  
Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験 (プロモーション試験)

試験番号 : T-G310

試験期間 : 2017 年 12 月 13 日 - 2018 年 2 月 14 日

### 試験施設

株式会社ボゾリサーチセンター 東京研究所  
〒156-0042 東京都世田谷区羽根木 1-3-11

### 試験委託者

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課  
〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 2 号

株式会社ボゾリサーチセンター  
〒151-0065 東京都渋谷区大山町 36-7

## 2. 目次

1.	試験責任者陳述書.....	2
2.	目次.....	3
3.	試験実施概要.....	5
3.1	試験番号.....	5
3.2	試験標題.....	5
3.3	試験目的.....	5
3.4	試験委託者.....	5
3.5	試験受託者.....	5
3.6	試験実施施設.....	5
3.7	試験日程.....	5
3.8	試験責任者.....	5
3.9	試験担当者.....	5
3.10	予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのあ る事態及び試験計画書に従わなかつたこと.....	6
3.11	試験資料保存.....	6
3.12	試験責任者の記名・押印及びその日付.....	6
4.	要約.....	7
5.	緒言.....	8
6.	試験材料及び方法.....	9
6.1	被験物質及び溶媒.....	9
6.1.1	被験物質.....	9
6.1.2	溶媒.....	10
6.1.3	溶媒の選択理由.....	10
6.2	被験液の調製.....	10
6.2.1	調製方法.....	10
6.2.1.1	細胞増殖試験.....	10
6.2.1.2	形質転換試験.....	10
6.2.2	調製頻度.....	11
6.2.3	安定性.....	11
6.3	対照物質.....	11
6.3.1	陰性（溶媒）対照.....	11
6.3.2	陽性対照.....	11
6.4	細胞株、培養方法及び培養液.....	12
6.4.1	細胞株.....	12
6.4.2	培養液及び細胞の培養方法.....	12
7.	試験方法.....	13

7.1	識別方法 .....	13
7.2	用量の設定 .....	13
7.2.1	細胞増殖試験 .....	13
7.2.2	形質転換試験 .....	13
7.3	細胞増殖試験 .....	13
7.3.1	実験操作 .....	13
7.3.2	相対細胞増殖率の算出 .....	14
7.4	形質転換試験 .....	14
7.4.1	実験操作 .....	15
7.4.2	形質転換巣（フォーカス）の観察及び計測 .....	15
7.5	結果の解析 .....	16
7.5.1	統計解析 .....	16
7.5.2	数値の取扱い .....	16
7.6	試験成立基準 .....	16
7.7	結果の判定 .....	17
8.	試験結果及び考察 .....	18
8.1	細胞増殖試験 .....	18
8.2	形質転換試験 .....	18
9.	参考文献 .....	19

## 図

- 図 1 アルカン酸（C=4~30）の Bhas 42 細胞における細胞増殖試験の相対細胞増殖率の結果
- 図 2 アルカン酸（C=4~30）の Bhas 42 細胞における形質転換試験の結果

## 表

- 表 1 アルカン酸（C=4~30）の Bhas 42 細胞における細胞増殖試験の相対細胞増殖率の結果
- 表 2 アルカン酸（C=4~30）の Bhas 42 細胞における形質転換試験の相対細胞増殖率の結果
- 表 3 アルカン酸（C=4~30）の Bhas 42 細胞における形質転換試験の結果

## 信頼性保証書

T-G310

### 3. 試験実施概要

#### 3.1 試験番号

T-G310

#### 3.2 試験標題

アルカン酸 (C=4~30) の Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験 (プロモーション試験)

#### 3.3 試験目的

Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験により、アルカン酸 (C=4~30) の *in vitro* での発がんプロモーション作用を検討した。

#### 3.4 試験委託者

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課  
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

#### 3.5 試験受託者

株式会社ボゾリサーチセンター  
〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7

#### 3.6 試験実施施設

株式会社ボゾリサーチセンター 東京研究所  
〒156-0042 東京都世田谷区羽根木1-3-11

#### 3.7 試験日程

試験開始日 : 2017年12月13日  
被験物質受領日 : 2017年11月7日  
試験終了日 : 2018年2月14日

#### 3.8 試験責任者

株式会社ボゾリサーチセンター 東京研究所 研究部  
福田 隆之

#### 3.9 試験担当者

被験物質保存責任者 : 山崎 英一  
試験主担当者 : 中村 真生

### 3.10 予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかつたこと

本試験において予見することができなかつた試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかつたことはなかつた。

### 3.11 試資料保存

試験計画書、記録文書、被験物質、生データ及び報告書類（最終報告書の原本を含む）は、株式会社ボゾリサーチセンター御殿場研究所の資料保存施設に最終報告書提出後10年間保存する。期間終了後の保存については、厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課と株式会社ボゾリサーチセンター間で協議し、その処置を決定する。

#### 4. 要約

「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」に従い、Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験により、アルカン酸 (C=4~30) の *in vitro* での発がんプロモーション作用を検討した。

形質転換試験の用量を設定するため、「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」に定められる 1050 µg/mL (10 mM) を最高用量とし、以下公比 2 で希釈した 525、263、131、65.6、32.8、16.4 及び 8.20 µg/mL の計 8 用量を設定して細胞増殖試験を行った。細胞増殖試験の結果、被験物質処理群の 1050 µg/mL の用量において、軽微な細胞増殖の抑制作用が認められた。50%以上の細胞増殖抑制作用は認められなかったが、形質転換試験においては被験物質処理期間が長期であることから、より強く細胞毒性が発現する可能性を考慮し、評価可能な 4 用量以上の用量数を得るため、最高用量を 1050 µg/mL (約 10mM) とし、以下公比 2 で希釈した 525、263、131、65.6 及び 32.8 µg/mL の計 6 用量を設定した。

形質転換試験の結果、被験物質処理群のいずれの用量においても陰性 (溶媒) 対照 (5 vol%注射用水) 群に対する形質転換率の有意な増加は認められなかった (Dunnett の多重比較検定、5%有意水準、片側検定) ことから、本被験物質には *in vitro* での発がんプロモーション作用はないものと考えられた。

なお、陰性 (溶媒) 対照 (5 vol%注射用水) 群における形質転換巢率は 1.5 個/ウェルと 12 個/ウェル未満であった。一方、陽性対照群における形質転換巢率は 8.7 個/ウェルと、陰性 (溶媒) 対照 (0.1 vol%DMSO) 群の 1.5 個/ウェルと比較して、統計学的に有意な増加を示した (Student の t 検定、 $p < 0.05$ )。また、細胞増殖試験における各用量の評価可能なウェル数はすべて 3 ウェルであり、形質転換試験では各用量の評価可能なウェル数はすべて 6 ウェルであった。形質転換試験における評価可能な用量は 6 用量であった。これらの結果より、本試験は適切に実施されたものと判断した。

以上の結果から、本試験条件下において、アルカン酸 (C=4~30) は *in vitro* での発がんプロモーション作用を有しないと判定した。

## 5. 緒言

アルカン酸（C=4~30）の安全性評価の一環として、Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験により、アルカン酸（C=4~30）の *in vitro* での発がんプロモーション作用を検討したので、その成績を報告する。

遵守した基準及び採用した試験方法などは以下の通りである。

### 1) GLP

- 労働安全衛生規則第 34 条の 3 第 2 項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準」  
（昭和 63 年 9 月 1 日労働省告示第 76 号）

### 2) 採用した試験方法


- 「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」  
（平成 26 年 7 月 4 日、厚生労働省第 3 回遺伝毒性評価ワーキンググループ合意事項）

## 6. 試験材料及び方法

## 6.1 被験物質及び溶媒

## 6.1.1 被験物質

名称	:	アルカン酸 (C=4~30)
供給者	:	和光純薬工業株式会社
製造元	:	和光純薬工業株式会社
ロット番号	:	ECE6360
CAS 番号	:	75-98-9
官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	:	(2)-608
入手量	:	25 mL
構造式	:	

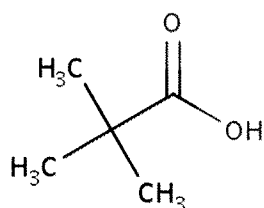

分子量	:	102.132
外観	:	エタノール溶状、澄明
凝固点	:	35°C
含量	:	100.1%
融点	:	35°C
沸点	:	164°C
logP (オクタノール - 水)	:	1.48 none
水溶性	:	21700 mg/L
蒸気圧	:	1.820 mmHg
保存条件	:	室温 (実測値: 18.3 ~ 19.8°C、2017年11月7日 ~ 2018年1月5日) *
保存場所	:	東京研究所 被験物質保存室
残量の処置	:	実験終了後の残量はすべて廃棄した。

上記被験物質情報は、製造元の COA ならびに公開情報に基づく。

\* 2017年11月25日に東京研究所 被験物質保存室が移設されたが、その際に被験物質の移動に伴う30分程度の温度記録欠損が生じた。しかしながら、被験物質の移動は発泡スチロール製の容器に入れた状態で短時間に行われたため、被験物質に影響を及ぼすような温度の異常はなかったと考えられる。



### 6.1.2 溶媒

名称	:	注射用水
ロット番号	:	7G74N
製造元	:	株式会社大塚製薬工場
規格	:	日本薬局方
保存条件	:	室温保存
保存場所	:	東京研究所 標本作製室

### 6.1.3 溶媒の選択理由

溶解性試験を実施した結果、本被験物質は注射用水に 21.0 mg/mL で溶解し、発熱、ガスの発生等の反応性も認められなかったため、溶媒として注射用水を選択した。

## 6.2 被験液の調製

### 6.2.1 調製方法

被験物質と溶媒の混合液を被験液、被験液を添加した培養液を被験物質処理液と定義した。

#### 6.2.1.1 細胞増殖試験

- 1) 被験物質 0.0420 g を 2 mL メスフラスコに秤取した。
- 2) 溶媒で溶解した後に、メスアップして最高濃度の 21.0 mg/mL 溶液を調製した。
- 3) 21.0 mg/mL 溶液を公比 2 (各濃度の被験液 1.0 mL : 溶媒 1.0 mL) で 7 段階希釈し、10.5、5.25、2.63、1.31、0.656、0.328 及び 0.164 mg/mL の計 8 濃度段階の被験液を調製した。
- 4)  $\gamma$  線滅菌済プラスチック遠沈管に DF5F 培養液 9.5 mL ずつ分注し、3) で調製した 8 濃度段階の被験液 0.5 mL 添加し、それぞれ攪拌したものを被験物質処理液とした。

#### 6.2.1.2 形質転換試験

- 1) 被験物質 0.1050 g を 5 mL メスフラスコに秤取した。
- 2) 溶媒で溶解した後に、メスアップして最高濃度の 21.0 mg/mL 溶液を調製した。
- 3) 21.0 mg/mL 溶液を公比 2 (各濃度の被験液 2.5 mL : 溶媒 2.5 mL) で 5 段階希釈し、10.5、5.25、2.63、1.31 及び 0.656 mg/mL の計 6 濃度段階の被験液を調製した。
- 4)  $\gamma$  線滅菌済プラスチック遠沈管に DF5F 培養液 19 mL ずつ分注し、3) で調製した 6 濃度段階の被験液 1.0 mL 添加し、それぞれ攪拌したものを被験物質処理液とした。

T-G310

### 6.2.2 調製頻度

用時に調製した。形質転換試験では細胞への処理毎に計3回調製した。

### 6.2.3 安定性

用時調製のため、安定性確認は実施しなかった。

## 6.3 対照物質

### 6.3.1 陰性（溶媒）対照

溶媒として用いる注射用水を、最終濃度が5 vol%となるようにDF5F培養液に添加したものを陰性（溶媒）対照とした。

### 6.3.2 陽性対照

12-*O*-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) はジメチルスルホキシド (DMSO、和光純薬工業株式会社、JIS規格試薬特級、ロット番号：TWP0794) に溶解し、0.050 mg/mL に調製した（ストック溶液）。調製した陽性対照物質溶液は、約0.25 mL ずつ分注後-20°C 以下で保存し、調製後2年以内のものを使用した。なお、一度解凍した溶液は再使用しなかった。

#### 1) 物性情報

名称	:	12- <i>O</i> -tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)
ロット番号	:	SLBS0478V
製造元	:	Sigma-Aldrich
規格	:	分子生物学用 (99.0%以上)
保存方法	:	冷凍 (-20°C 以下)
保存場所	:	東京研究所 培養細胞試験室 冷凍庫

#### 2) 調製方法

- (1) ストック溶液を用時解凍した。
- (2) DF5F 培養液を用い、ストック溶液 0.02 mL に対し、DF5F 培養液 19.98 mL の割合で陽性対照処理液を調製した（最終濃度：50 ng/mL）。
- (3) 同様に、DMSO 0.02 mL に対し、DF5F 培養液 19.98 mL の割合で処理培養液を調製し、これを陰性（溶媒）対照（0.1 vol%DMSO）とした。
- (4) ストック溶液は、解凍後1回のみ使用とし、凍結融解を繰り返さなかった。残余物は、発がん性廃棄物として廃棄した。

#### 3) 陽性対照物質の選択理由

「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」に使用が定められているため。

## 6.4 細胞株、培養方法及び培養液

### 6.4.1 細胞株

名称	:	Bhas 42 細胞 (マウス全胎児由来 BALB/c 3T3 A31-1-1 に v-Ha-ras 遺伝子を導入した細胞) <sup>1)</sup>
ロット番号 (購入)	:	053000
入手元	:	独立行政法人 医薬基盤研究所 JCRB 細胞バンク
入手年月日	:	2013 年 11 月 20 日
保存方法	:	入手後、DMSO を 5 vol% 添加した M10F 培養液に細胞を約 $5 \times 10^5$ cells/mL の濃度で懸濁し、液体窒素中で凍結保存した。
特性検査	:	マイコプラズマ汚染 ; 陰性 コロニー形成能 ; 0.66 (基準 ; 0.5 以上)
選択理由	:	「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」に使用が定められているため。

### 6.4.2 培養液及び細胞の培養方法

本試験では、牛胎児血清 (FBS : Fetal Bovine Serum) を 5 vol%、ペニシリン-ストレプトマイシン混合溶液を 1 vol% 含む Dulbecco's modified Eagle's medium/Ham's F12 (DMEM/F12 培養液) を用い、37°C、CO<sub>2</sub> 濃度 5% の条件下で培養した。細胞融解後の前培養期間においては、MEM 培地に FBS を 10 vol% 加えた培養液 (M10F 培養液) を用いた。いずれの培養液も調製後 1 箇月を使用期限として冷蔵保存した。

培養操作は、70% コンフルエントを超えない時点で行った。

#### 1) 牛胎児血清 (FBS : Fetal Bovine Serum)

ロット番号	:	bfs45yy
製造元	:	Moregate Biotech
保存方法	:	冷凍 (-20°C 以下)
保存場所	:	東京研究所 培養細胞試験室 冷凍庫

#### 2) Dulbecco's modified Eagle's medium/Ham's F12 (DMEM/F12)

ロット番号	:	1897090
製造元	:	Life Technologies Corporation
保存方法	:	冷蔵
保存場所	:	東京研究所 培養細胞試験室 冷蔵庫

#### 3) ペニシリン-ストレプトマイシン混合溶液

ロット番号	:	L7P3412
製造元	:	ナカライテスク株式会社
組成	:	ペニシリン ; 10,000 U/mL ストレプトマイシン ; 10,000 µg/mL

T-G310

保存方法 : 冷凍 (-20°C 以下)  
保存場所 : 東京研究所 培養細胞試験室 冷凍庫

## 7. 試験方法

形質転換試験の用量設定のための細胞増殖試験を実施し、形質転換試験を行った。なお、形質転換試験はプロモーション試験のみ実施した。

### 7.1 識別方法

使用機材には、試験番号、処理群、コード番号などを記載して識別した。

### 7.2 用量の設定

#### 7.2.1 細胞増殖試験

「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」に従って、最高用量を 1050 µg/mL (10 mM) とし、以下公比 2 で希釈した 525、263、131、65.6、32.8、16.4 及び 8.20 µg/mL の計 8 用量を設定した。これにブランク群及び陰性 (溶媒) 対照群 (5 vol% 注射用水) を設けた。

#### 7.2.2 形質転換試験

細胞増殖試験の結果、被験物質処理群の 1050 µg/mL の用量において、軽微な細胞増殖の抑制作用が認められた。50%以上の細胞増殖抑制作用は認められなかったが、形質転換試験においては被験物質処理期間が長期であることから、より強く細胞毒性が発現する可能性を考慮し、評価可能な 4 用量以上の用量数を得るため、最高用量を 1050 µg/mL (約 10mM) とし、以下公比 2 で希釈した 525、263、131、65.6 及び 32.8 µg/mL の計 6 用量を設定した。これにブランク群、陰性 (溶媒) 対照 (5 vol% 注射用水または 0.1 vol%DMSO) 群及び陽性対照群を設けた。

### 7.3 細胞増殖試験

形質転換試験の用量を設定するための予備試験として実施した。試験には、ブランク群 (培養液のみ)、陰性 (溶媒) 対照 (5 vol% 注射用水) 群及び被験物質処理群を設けた。プレートは γ 線滅菌済の 6 ウェルプレートを用い、1 群当りのウェル数は 3 ウェルとした。なお、以下の試験操作のうち、無菌性を必要とする場合は、無菌環境下において、滅菌済の器具を用いて、無菌操作によって実施した。

#### 7.3.1 実験操作

- 1) 継代細胞を 0.25% Trypsin 溶液 (Life Technologies Corporation) により剥離させ、DF5F 培養液を用いて、 $0.7 \times 10^4$  cells/mL の細胞懸濁液を調製した。本細胞懸濁液 2 mL ( $1.4 \times 10^4$  cells/ウェル) を 6 ウェルプレートに播種し、CO<sub>2</sub> 濃度 5%、温度 37°C、高湿度条件下の炭酸ガス培養器内に入れ、約 4 日間静置した。

- 2) 播種 4 日後、プレートより培養液を除去し、各濃度段階の被験物質処理液及び陰性（溶媒）対照処理液の各々 2 mL を、対応する各ウェルに分注した。ブランク群については、細胞が播種されていないウェルに培養液のみ 2 mL を分注した。CO<sub>2</sub> 濃度 5%、温度 37°C、高湿度条件下の炭酸ガス培養器内に入れ約 3 日間培養した。
- 3) 播種 7 日後、プレートより培養液を除去し、各ウェルにメチルアルコール約 2 mL を分注し、10 分間以上固定した。固定後、0.1 vol% クリスタルバイオレット染色液 1.5 mL を各ウェルに分注し、室温で 15 分間以上染色した。プレートを水洗し、風乾させた後、色素抽出液（48 vol% エタノール\* 及び 0.02 mol/L 塩酸）2 mL を各ウェルに分注し、15 分間以上静置（色素抽出）した。
- 4) 各抽出液 100 µL を 96 ウェルプレートに分取し、540 nm における吸光度をマイクロプレートリーダー（SPECTRAmax PLUS384）で測定した。

\* 試験計画書において、色素抽出液のエタノール含量を 50 vol% と規定したが、細胞増殖試験では当調製記録から 48 vol% で調製し、試験に使用していたことが判明した。試験計画書に従って実施された形質転換試験と本細胞増殖試験の間には、ブランク群の吸光度に差は見られなかったことから、色素抽出は適切に行われていたと考えられた。したがって、試験結果には影響を及ぼさないと判断した。

### 7.3.2 相対細胞増殖率の算出

次式により、被験物質処理群における相対細胞増殖率（%）を求めた。なお、計算値の取り扱いは、7.5.2 項に従った。50% 以上の細胞増殖抑制は認められなかったため、IC<sub>50</sub> 値は算出しなかった。

$$X (\%) = (T - B) / (S - B) \times 100$$

- X : 被験物質処理群の相対細胞増殖率（%）  
 S : 陰性（溶媒）対照群（5 vol% 注射用水）の吸光度  
 T : 被験物質処理群の吸光度  
 B : ブランクの吸光度（培地のみを入れたウェル）

### 7.4 形質転換試験

形質転換試験において、被験物質の細胞毒性を評価するため、並行して細胞増殖試験も実施した。試験には、被験物質処理群、ブランク群（細胞増殖試験のみ）、陰性（溶媒）対照（5 vol% 注射用水または 0.1 vol% DMSO）群及び陽性対照群を設けた。プレートは γ 線滅菌済の 6 ウェルプレートを用い、1 群当りのウェル数は形質転換試験では 6 ウェル、細胞増殖試験では 3 ウェルを用いた。なお、以下の試験操作のうち、無菌性を必要とする場合は、無菌環境下において、滅菌済の器具を用いて、無菌操作によって実施した。

### 7.4.1 実験操作

- 1) 継代細胞を 0.25% Trypsin 溶液 (Life Technologies Corporation) により剥離させ、DF5F 培養液を用いて、 $0.7 \times 10^4$  cells/mL の細胞懸濁液を調製した。本細胞懸濁液 2 mL ( $1.4 \times 10^4$  cells/ウェル) を 6 ウェルプレートに播種し、CO<sub>2</sub> 濃度 5%、温度 37°C、高湿度条件下の炭酸ガス培養器内に入れ、約 4 日間静置した。
- 2) 播種 4 日後、プレートより培養液を除去し、各濃度段階の被験物質処理液、陰性 (溶媒) 対照処理液 (5 vol% 注射用水または 0.1 vol% DMSO) 及び陽性対照処理液の各々 2 mL を、各ウェルに分注した。ブランク群については、播種 4 日後のみ細胞が播種されていないウェルに培養液を 2 mL 分注した。CO<sub>2</sub> 濃度 5%、温度 37°C、高湿度条件下の炭酸ガス培養器内に入れ約 3 日間培養した。播種 7 日後及び播種 11 日後にも同様の操作を行った。
- 3) 形質転換用プレートについては、播種 14 日後、各プレートより培養液を除去し、新鮮な DF5F 培養液 2 mL を各ウェルに分注した。CO<sub>2</sub> 濃度 5%、温度 37°C、高湿度条件下の炭酸ガス培養器内に入れて更に約 7 日間培養した。
- 4) 播種 21 日後、プレートより培養液を除去し、メタノール約 1 mL を各ウェルに分注し、10 分以上固定した。メタノールを除去し、5 vol% ギムザ液 1.5 mL ずつ分注し、15 分以上染色後、水洗し、風乾した。
- 5) 細胞増殖試験用プレートについては、播種 7 日後、7.3.1 項の 3) 及び 4) に従い吸光度を測定し、7.3.2 項同様に相対細胞増殖率を算出した。なお、計算式は次式に従った。

$$X (\%) = (T-B)/(S-B) \times 100$$

- X : 被験物質処理群または陽性対照群の相対細胞増殖率 (%)
- S : 陰性 (溶媒) 対照群 (5 vol% 注射用水または 0.1 vol% DMSO) の吸光度
- T : 被験物質処理群または陽性対照群の吸光度
- B : ブランクの吸光度 (培地のみを入れたウェル)

### 7.4.2 形質転換巣 (フォーカス) の観察及び計測

肉眼あるいは実体顕微鏡下で細胞を観察し、次の基準により形質転換巣であると判定したものを計数した。なお、形質転換巣は、下記の形態的特徴のすべてを必要とせず、特に 2) から 6) が明確に観察出来る場合に計数した。なお、観察前にプレートをコード化し、処理条件が判らない状況下で観察した。観察後、プレートは廃棄した。

- 1) 形質転換巣が 100 細胞以上で構成されているもの。
- 2) 形質転換巣の細胞は紡錘形を示し、周囲の細胞とは明確に異なる細胞形態を示すもの (spindle-shaped)。
- 3) 細胞質が塩基性 (濃い紫色) に強く染まっているもの (basophilic)。
- 4) 形質転換巣の細胞がランダムな配列で互いに交差しているもの (criss-cross)。
- 5) 積み重なりあった細胞の増殖が見られるもの (piling-up)。

- 6) 接触阻害を示すコンフルエント状態の細胞周囲に浸潤(invasive)しているもの。

## 7.5 結果の解析

### 7.5.1 統計解析

#### 1) 試験成立基準

形質転換率（平均形質転換巢/ウェル）について、陰性（溶媒）対照群（0.1 vol%DMSO）と陽性対照群間で Student の t 検定を行った（有意水準 5%、上側確率）。

#### 2) 結果の判定

- (1) 形質転換率について、陰性（溶媒）対照群（5 vol%注射用水）と被験物質処理群間で Dunnett の多重比較検定（有意水準 5%、片側検定）を行った。
- (2) (1)において、5%水準で有意性が見出されなかったため、Jonckheere の検定（有意水準 5%、上側確率）は行わなかった。

### 7.5.2 数値の取扱い

#### 1) 細胞増殖試験

- (1) 各ウェルの吸光度（表示：小数点第 3 位）
- (2) 用量当たりの平均吸光度（表示：小数点第 3 位）及び標準偏差（表示：小数点第 3 位）
- (3) 相対細胞増殖率（単位：%、表示：有効数字 3 桁）
- (4) IC<sub>50</sub> 及び IC<sub>90</sub> 値（単位：μg/mL、表示：有効数字 3 桁）

#### 2) 形質転換試験

- (1) 細胞増殖率の測定に関する数値は、細胞増殖試験と同様とした。
- (2) 各ウェルの形質転換巢の数（単位：個、表示：整数）
- (3) 用量当たりの形質転換率（単位：個/ウェル、表示：小数点第 1 位）及び標準偏差（表示：小数点第 1 位）

## 7.6 試験成立基準

以下の項目のすべてを満たしたため、試験は適切に実施されたものと判断した。

#### 1) 細胞増殖試験

- (1) 各用量の評価可能なウェル数が 2 ウェル以上であること。

#### 2) 形質転換試験

- (1) 各用量の評価可能なウェル数が 5 ウェル以上であること。
- (2) 評価可能な用量数が 4 用量以上であること。
- (3) 陰性対照群の形質転換率が 12 個/ウェル未満であること。
- (4) 陽性対照群の形質転換率が、陰性（溶媒）対照（0.1 vol%DMSO）群と比較して統計学的に有意な増加を示すこと。

## 7.7 結果の判定

結果の判定は下記の基準によるが、生物学的妥当性を勘案して総合的に評価した。

1) 陰性

被験物質処理群の形質転換率が陰性（溶媒）対照群（5 vol%注射用水）と比較して統計学的有意差が認められない場合。

2) 陽性

被験物質処理群の形質転換率が陰性（溶媒）対照群（5 vol%注射用水）と比較して、統計学的に有意に増加し、かつ、その作用に濃度依存性が認められる場合。



## 8. 試験結果及び考察

### 8.1 細胞増殖試験

結果を図1及び表1に示した。

形質転換試験の用量を設定するため、「Bhas 42 細胞を用いる形質転換試験による調査の基準」に定められる 1050 µg/mL (10 mM) を最高用量とし、以下公比 2 で希釈した 525、263、131、65.6、32.8、16.4 及び 8.20 µg/mL の計 8 用量を設定して細胞増殖試験を行った。細胞増殖試験の結果、被験物質処理群の 1050 µg/mL の用量において、軽微な細胞増殖の抑制作用が認められた。50%以上の細胞増殖抑制作用は認められなかったが、形質転換試験においては被験物質処理期間が長期であることから、より強く細胞毒性が発現する可能性を考慮し、評価可能な 4 用量以上の用量数を得るため、最高用量を 1050 µg/mL (約 10mM) とし、以下公比 2 で希釈した 525、263、131、65.6 及び 32.8 µg/mL の計 6 用量を設定した。

### 8.2 形質転換試験

結果を図2及び表2ならびに表3に示した。

形質転換試験の結果、被験物質処理群のいずれの用量においても陰性（溶媒）対照（5 vol%注射用水）群に対する形質転換率の有意な増加は認められなかった（Dunnett の多重比較検定、5%有意水準、片側検定）ことから、本被験物質には *in vitro* での発がんプロモーション作用はないものと考えられた。

なお、陰性（溶媒）対照（5 vol%注射用水）群における形質転換率率は 1.5 個/ウェルと 12 個/ウェル未満であった。一方、陽性対照群における形質転換率率は 8.7 個/ウェルと、陰性（溶媒）対照（0.1%DMSO）群の 1.5 個/ウェルと比較して、統計学的に有意な増加を示した（Student の t 検定、 $p < 0.05$ ）。また、細胞増殖試験における各用量の評価可能なウェル数はすべて 3 ウェルであり、形質転換試験では各用量の評価可能なウェル数はすべて 6 ウェルであった。形質転換試験における評価可能な用量は 6 用量であった。これらの結果より、本試験は適切に実施されたものと判断した。

以上の結果から、本試験条件下において、アルカン酸（C=4~30）は *in vitro* での発がんプロモーション作用を有しないと判定した。

T-G310

## 9. 参考文献

- 1) Sasaki, K. et al.: Isolation and characterization of ras-transfected BALB/3T3 clone showing morphological transformation by 12-*O*-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate. Jpn. J. Cancer Res. 79: 921-930 (1988)

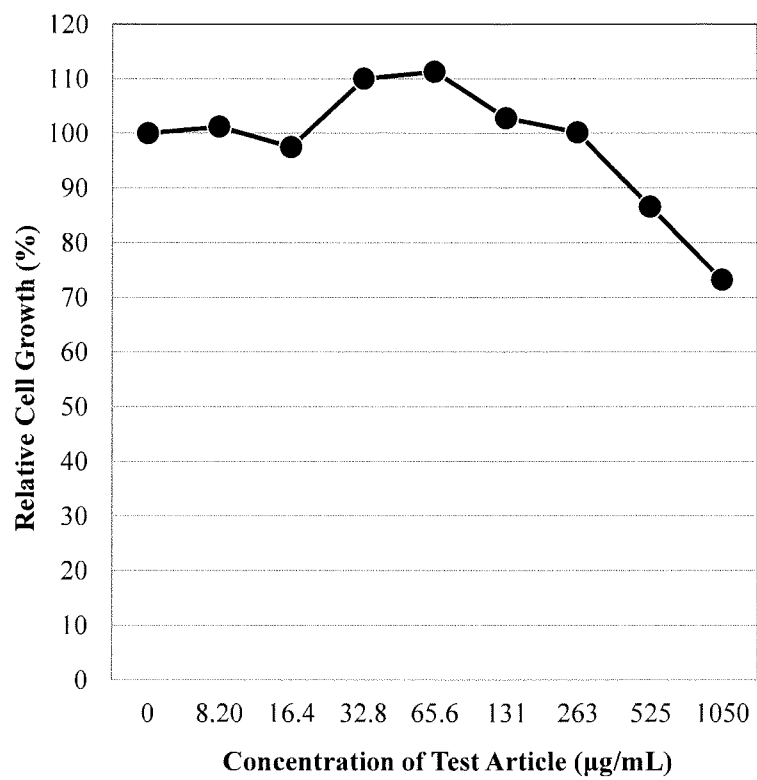


図1 アルカン酸 (C=4~30) の Bhas 42 細胞における細胞増殖試験の  
相対細胞増殖率の結果

陰性(溶媒)対照群: 注射用水

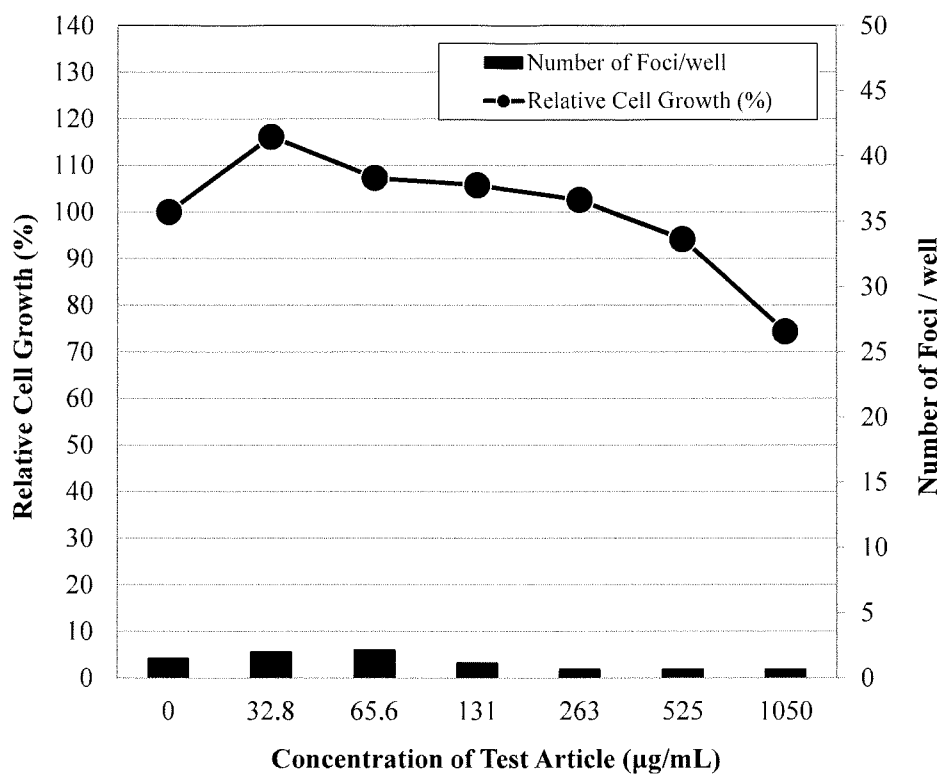


図2 アルカン酸 (C=4~30) の Bhas 42 細胞における形質転換試験の結果

陰性(溶媒)対照群: 注射用水

表1 アルカン酸 (C=4~30) の Bhas 42 細胞における細胞増殖試験の相対細胞増殖率の結果

物質名	用量 ( $\mu\text{g/mL}$ )	ウェル当たりの吸光度 (540 nm)					相対細胞 <sup>a)</sup> 増殖率 (%)
		1	2	3	平均値	標準偏差	
ブランク群	—	0.069	0.067	0.068	0.068	0.001	—
陰性(溶媒)対照群 <sup>b)</sup>	5 vol%	0.412	0.440	0.423	0.425	0.014	100
被験物質処理群	8.20	0.404	0.434	0.450	0.429	0.023	101
	16.4	0.403	0.432	0.413	0.416	0.015	97.5
	32.8	0.453	0.479	0.450	0.461	0.016	110
	65.6	0.489	0.453	0.454	0.465	0.021	111
	131	0.421	0.451	0.433	0.435	0.015	103
	263	0.425	0.431	0.421	0.426	0.005	100
	525	0.371	0.373	0.387	0.377	0.009	86.6
	1050	0.323	0.330	0.335	0.329	0.006	73.2

a) 各用量における平均吸光度から、ブランク群の平均吸光度を減じた値に対して、陰性(溶媒)対照群を値を100%とした場合の相対値を示す。

b) 陰性(溶媒)対照群: 注射用水

表2 アルカン酸 (C=4~30) の Bhas 42 細胞における形質転換試験の相対細胞増殖率の結果

物質名	用量 ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	ウェル当たりの吸光度 (540 nm)				標準偏差	相対細胞 <sup>a)</sup> 増殖率 (%)
		1	2	3	平均値		
ブランク群	–	0.072	0.070	0.064	0.069	0.004	–
陰性(溶媒)対照群 <sup>b)</sup>	5 vol%	0.454	0.462	0.446	0.454	0.008	100
被験物質処理群	32.8	0.554	0.522	0.473	0.516	0.041	116
	65.6	0.528	0.458	0.461	0.482	0.040	107
	131	0.484	0.484	0.461	0.476	0.013	106
	263	0.450	0.500	0.442	0.464	0.031	103
	525	0.449	0.449	0.397	0.432	0.030	94.2
	1050	0.364	0.371	0.331	0.355	0.021	74.4
陰性(溶媒)対照群 <sup>c)</sup>	0.1 vol%	0.504	0.424	0.438	0.455	0.043	100
陽性対照群 (TPA)	50 ng/mL	0.713	0.848	0.708	0.756	0.079	178

a) 各用量における平均吸光度から、ブランク群の平均吸光度を減じた値に対して、陰性(溶媒)対照群を値を100%とした場合の相対値を示す。

b) 陰性(溶媒)対照群: 注射用水, c) 陰性(溶媒)対照群: 0.1 vol% dimethyl sulfoxide (DMSO)

TPA: 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate

表3 アルカン酸 (C=4~30) の Bhas 42 細胞における形質転換試験の結果

物質名	用量 ( $\mu\text{g/mL}$ )	形質転換巣/ウェル								相対細胞 <sup>a)</sup> 増殖率 (%)
		1	2	3	4	5	6	平均値 <sup>b)</sup>	標準偏差	
陰性(溶媒)対照群 <sup>c)</sup>	5 vol%	2	2	1	2	1	1	1.5	0.5	100
被験物質処理群	32.8	2	2	4	2	2	0	2.0	1.3	116
	65.6	2	2	1	2	3	3	2.2	0.8	107
	131	2	2	2	0	0	1	1.2	1.0	106
	263	1	0	0	1	1	1	0.7	0.5	103
	525	1	1	1	1	0	0	0.7	0.5	94.2
	1050	1	1	0	0	1	1	0.7	0.5	74.4
陰性(溶媒)対照群 <sup>d)</sup>	0.1 vol%	2	1	1	3	2	0	1.5	1.0	100
陽性対照群(TPA)	50 ng/mL	5	9	10	12	9	7	8.7 <sup>†</sup>	2.4	178

a) 各用量における平均吸光度から、ブランク群の平均吸光度を減じた値に対して、陰性(溶媒)対照群を値を100%とした場合の相対値を示す。

b) 形質転換率(個/ウェル)を示す。 c) 陰性(溶媒)対照群: 注射用水

d) 陰性(溶媒)対照群: 0.1 vol% dimethyl sulfoxide (DMSO)

TPA: 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate

<sup>†</sup>  $p < 0.05$  (Studentのt検定)